

DIONavi. Surgical Manual_K Ver 6.2

Product Introduction: DIONavi.

Surgical Process



DIONavi. Surgical Manual은 DIONavi. 주문 시 확인사항, Planning Process, 시술 등의 활용을 위해 치과 배포용으로 제작된 DIONavi. 사용 설명 Manual입니다.

CONTENTS

04 DIONavi. Introduction

- 04 DIONavi. Workflow
- 06 주문방법

08 DIONavi. Process

09 1. CT Process

- 09 ① F.O.V size
- 09 ② 촬영시 교합
- 10 ③ CT 해상도

12 2. 스캔 Process

- 12 ① CT와 구강스캔의 필요성
- 13 ② 스캔 확인
- 14 ③ 정밀한 석고모델 제작
- 15 ④ Case별 스캔 방법
 - 15 - Normal Case
 - 16 - 금속보철이 있는 Case
 - 18 - 부분 무치악 Case
 - 20 - 무치악 Case
- 23 ⑤ 무치악 스캔 - Scan retractor

26 3. 주문 Process

- 26 ① DIONavi. PC 사이트 회원가입
- 29 ② DIONavi. 모바일 사이트 이용방법
- 31 ③ DIONavi. Guide 주문방법
- 34 ④ Implant studio에서 Planning file을 접수하는 방법

35 4. DIONavi. Surgical Guide Design

- 35 ① 정합
- 35 ② Implant planning
- 39 ③ Planning confirm
- 40 ④ Surgical guide design

44 Surgical Process

- 45 1. DIONavi. Guide 안착 확인 방법 / 주의사항
- 47 2. DIONavi. Surgical Kit Line-up
- 49 3. Surgical Kit 구성품
 - DIONavi. Master Kit
 - DIONavi. Narrow Kit
 - DIONavi. Protem Kit
 - DIONavi. Wide Kit
 - DIONavi. Flapless Crestal Sinus Kit
 - DIONavi. Special Kit

73 TIP 수술 유형별 Surgical tool 사용 방법

- 74 1. 발치즉시 Case
- 76 2. 개구량이 작은 Case
- 78 3. Sinus Case
- 83 4. Edentulous Case



* UV Activator 2 / DIO PROBO는 의료기기가 아닙니다.

DIONavi. Workflow

치과 DIONavi. Center 기공소




Order

치과 DIONavi. 사이트에서 CT 파일 업로드 및 주문




Oral scan

치과 3Shape 서버에서 DIONavi. Center로 TRIOS 스캔파일 전송
* 단, TRIOS 이외의 스캐너인 경우, DIONavi. 사이트에 CT파일과 함께 업로드

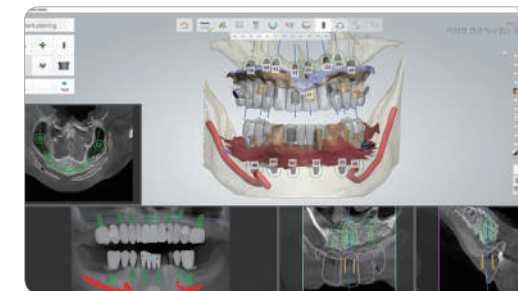



Planning

DIONavi. Center 주문서 내용을 기준으로 Implant planning

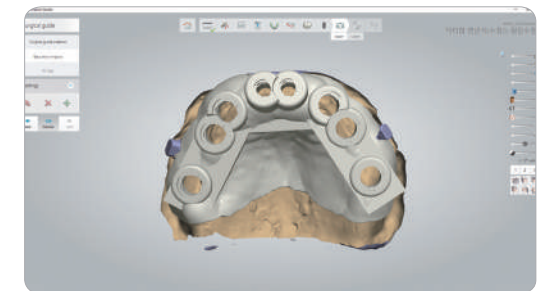

Guide design

DIONavi. Center 치과 DIONavi. 사이트에서 Planning 컨펌 후 Guide design

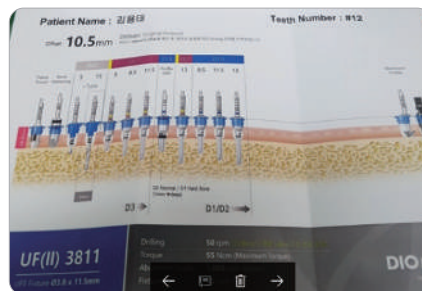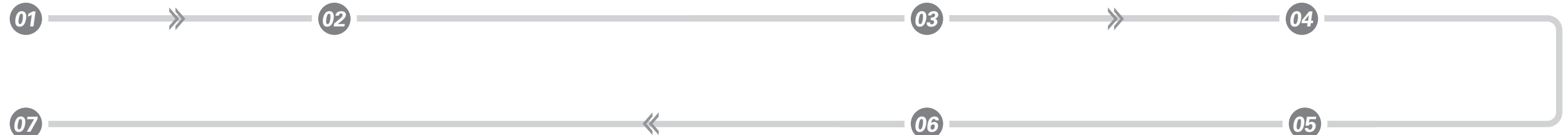


Packing & Delivery

DIONavi. Center Drilling protocol 출력 후 DIONavi. Guide 배송
기공소 SA, CA, DA, TC, AJ 배송



Production

DIONavi. Center 3D Printer로 Surgical guide 제작
기공소 SA, CA, DA, TC, AJ 제작

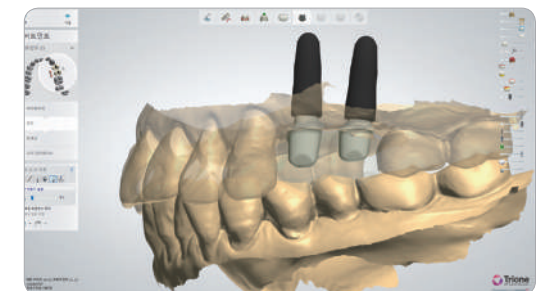

Prosthetic design

기공소 Planning 된 Implant 위치 기준으로 SA, CA, DA, TC, AJ Design


주문방법

CT스캔 데이터와 구강스캔 데이터를 DIONavi. Center로 전송하시면
일주일 이내에 3D printer로 제작된 Surgical guide를 이용한 Implant
시술이 가능합니다.

DIO에서 Planning 하는 경우 - TRIOS 구강스캔



DIO에서 Planning 하는 경우 - 석고모델

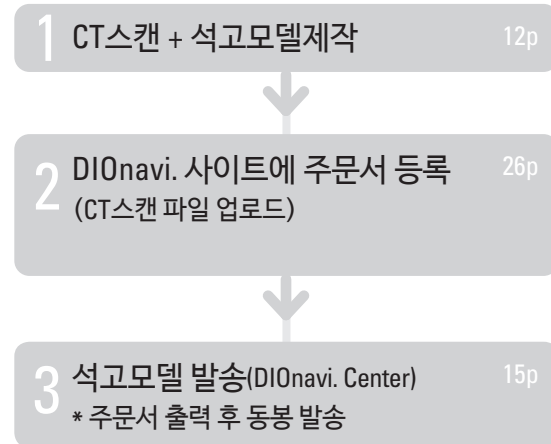

Clinic에서 Planning 하는 경우 - 구강스캔




Clinic
DIONavi. Center

4 Implant Planning (DIONavi. Center) 35p

5 Confirm (DIONavi. 사이트 / 원장님) 39p

6 Surgical Guide Design 40p

3D printer가 있는 경우

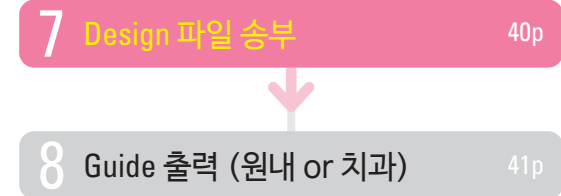

3D printer가 없는 경우



9 DIONavi. Surgery

| 제작기간 |

- 1차 Planning
 - ▶ CT 및 석고모델 / 구강스캔 데이터 도착시 1차 Planning Guide Design만 요청시
 - ▶ C.A 또는 D.A + TC + AJ 납기일은 기공소와 협의
 - 16시 전 석고모델 도착
 - ▶ Splint
 - 16시 전 Planning 컨펌
 - ▶ Surgical Guide
 - ▶ 16시 이전 Planning Confirm → 2박 3일
 - ▶ 16시 이후 Planning Confirm → 3박 4일
- * 공휴일, 주말제외

1일	2일	3일	4일
1박 2일			
2박 3일			
2박 3일			
3박 4일			

DIONavi. Process


1 CT Process

CT확인

치과의 CT 종류와 관리 상태에 따라서 Guide 제작 시 정밀도가 떨어질 수 있으며 반드시 사전에 치과의 CT 상태를 점검한 뒤 Guide 제작을 권장합니다.

① F.O.V size


사전에 치과 CT의 F.O.V size를 확인합니다. F.O.V size에 따라 Case의 제한이 있을 수 있습니다.

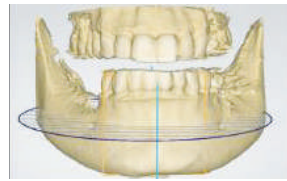	10 x 8.5cm 이상인 경우	8 x 8cm	8 x 5cm
스캔 Image			
Indication	Full arch까지 가능	편측 최후방 대구치~반대 측 소구치까지 가능 (1~8unit)	편측 최후방 대구치~전치까지 가능 (1~3unit)
비고	-	식립 개수가 많아질 경우 2개의 Surgical guide로 제작할 수 있음	

② 촬영시 교합



Open bite (일반 Case)

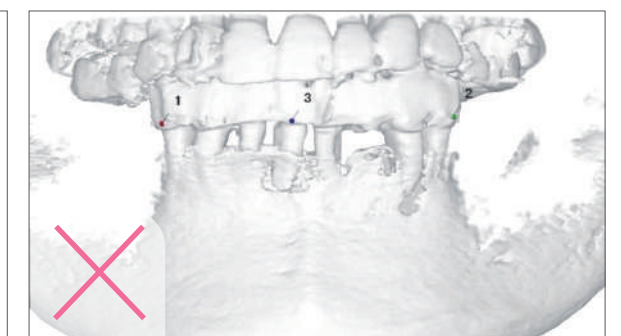

Close bite (Splint 또는 Denture)



주의 Close bite로 CT스캔 시 치아 정보가 정확히 나오지 않아 작업이 불가능할 수 있습니다.

Tip 거즈를 구강에 물리면 Open bite를 쉽게 만들 수 있습니다.

③ CT 해상도

치과에 보유하고 있는 CT의 해상도가 떨어지는 경우 뼈, 치아, 신경 등이 보이지 않을 수 있습니다.
해상도가 흐린 경우에는 반드시 사전에 보정이 필요합니다.

CT 중첩




오류원인

CT 촬영 시 환자의 움직임으로 CT 영상이 중첩됨

해결방법

환자가 움직이지 않게 주의 후 재스캔

CT 산란

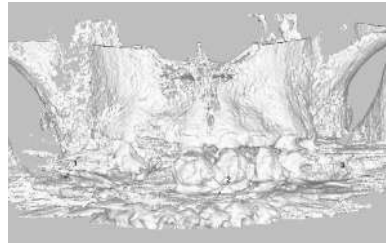

오류원인


환자의 구강에 금속 보철물로 인한 Metal artifact로
정합 Point 설정 불가

해결방법


보철물이 존재하는 부위에 레진 또는 Marker 부착 후 스캔 + CT촬영
※ 레진 또는 Marker 부착 방법은 15P 참고

CT 잘림

Sinus Case - 상악동 잘림

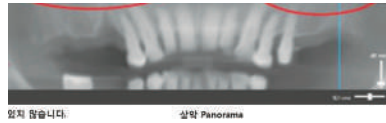

하악 Case - 하악 신경 잘림

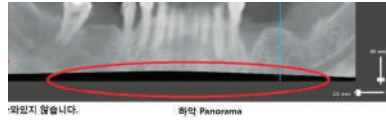

전치부 Case - 전치부 잘림



오류원인

CT잘림으로 인해 해부학적 구조(상악구치부 : Sinus /
하악구치부 : 하치조신경)가 정상적으로 나오지 않음

해결방법


CT 영역 재설정 필요

CT 단층



오류원인

CT촬영방법 오류

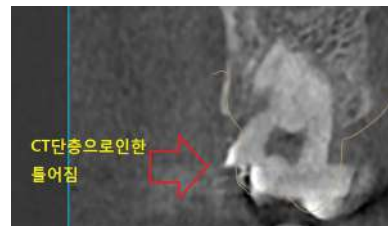

해결방법

제조사에 문의

Denture 또는 Splint 장착여부 (무치악 case)

Denture 미 장착




오류원인

무치악 Case에서 Denture 또는 Splint
미 장착으로 인해 정확한 정합이 어려움

해결방법

환자의 잇몸에 정확히 장착 후
Close bite CT 재촬영

Splint 미 장착

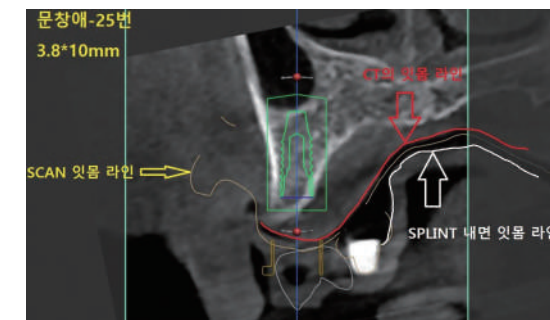


CT의 수평오차

CT의 수평오차가 있을 경우 정합이 안되거나 시술 시 방향이 틀어질 수 있습니다.
오차가 0.5mm 이상 발생한 경우 반드시 보정이 필요합니다.

석고모델을 활용한 CT오차 확인방법



석고모델에 Marker를 부착 후 실거리 측정

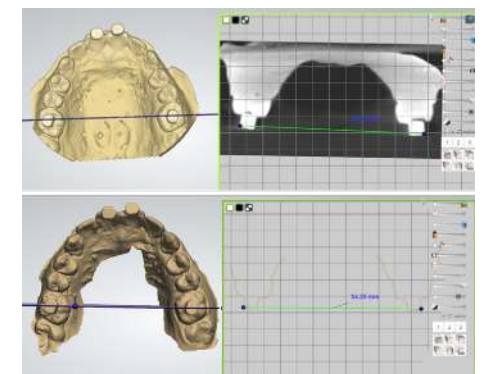

석고모델을 CT촬영하여 실거리를 측정한 값과 비교

※ 측정값이 다를 경우, 제조사에 문의하여 보정하시기 바랍니다.


2 스캔 Process

① CT와 구강스캔의 필요성

CT스캔 데이터에서는 치아와 뼈의 해부학적 정보 채득이 가능하나 치은이 잘 나오지 않으며
구강스캔 데이터에서는 치아와 치은의 해부학적 정보를 얻을 수 있으나 뼈의 정보를 얻을 수 없습니다.


Surgical guide 제작을 위해서는 치아와 치은, 뼈의 정보가 모두 필요하며
CT스캔 데이터와 구강스캔 데이터를 정합하여 사용합니다.

*정합 기준: 치아 정보(CT스캔과 구강스캔의 공통정보)

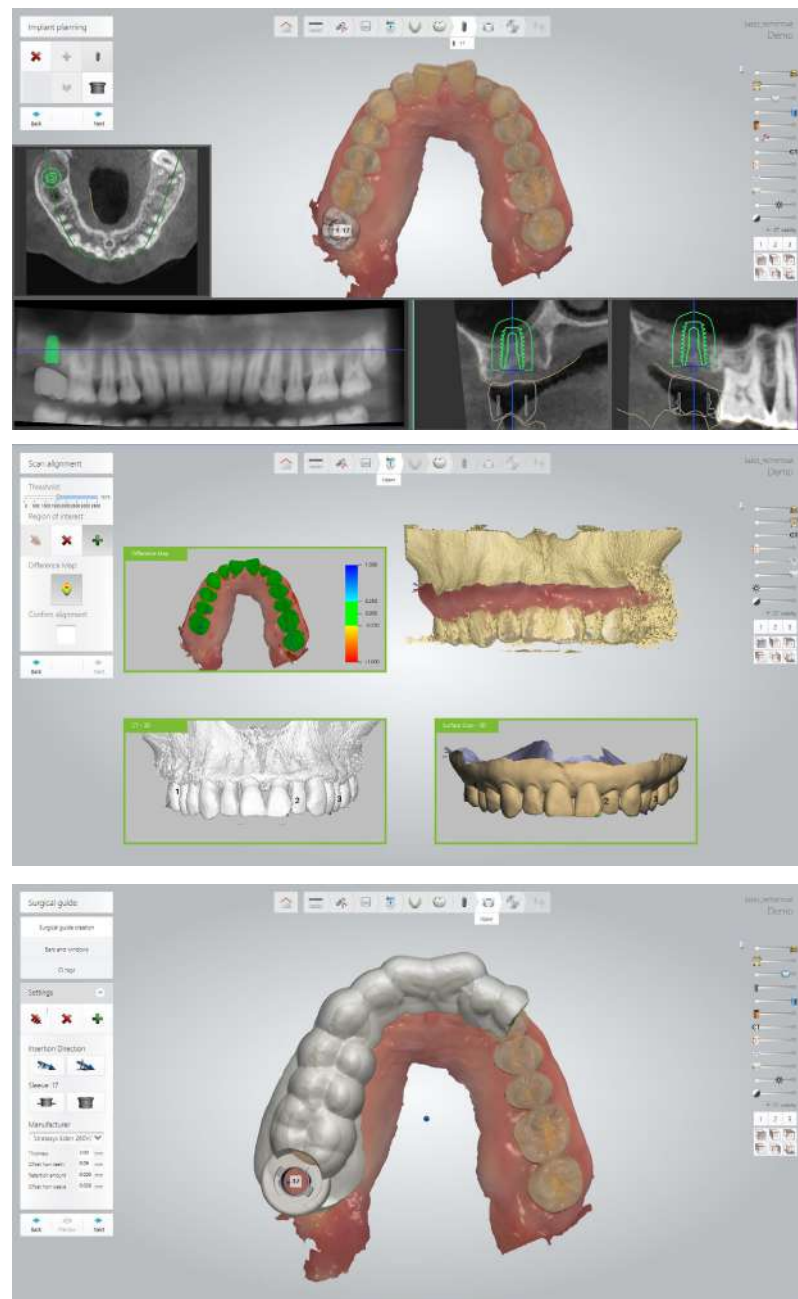

② 스캔 확인


DIONAVI. 진행 시 환자 구강에 가이드를 정확하게 안착시키기 위해서는 정밀한 구강스캔이 요구됩니다.
스캔이 덜 된 부위가 있는지 왜곡이 있는지 확인이 반드시 필요합니다.

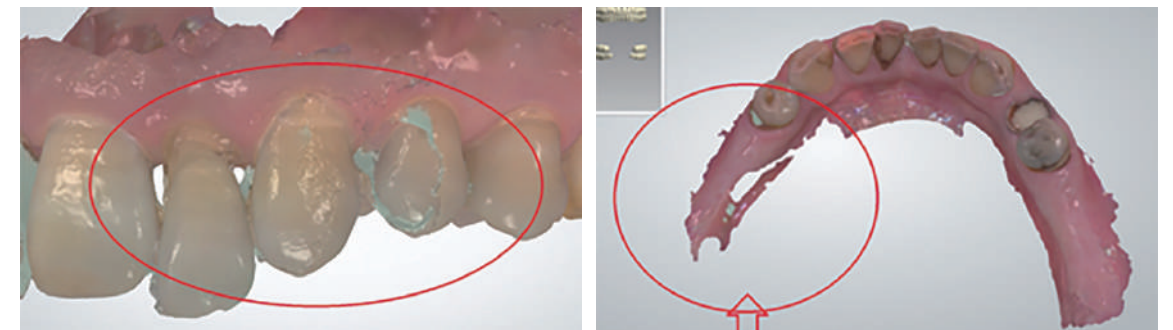

※ 표면버튼 을 선택하여 흑백화면으로 보시면 확인이 수월합니다.

스캔 오류 Case


스캔
중첩

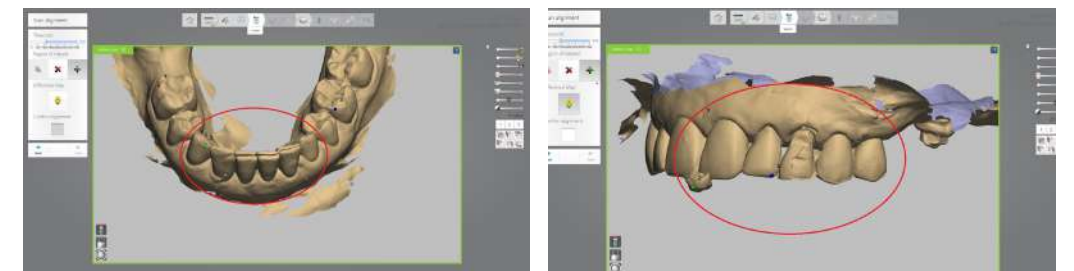


스캔
천공



스캔
과잉

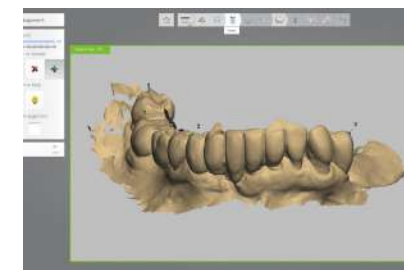


스캔
영역
부족

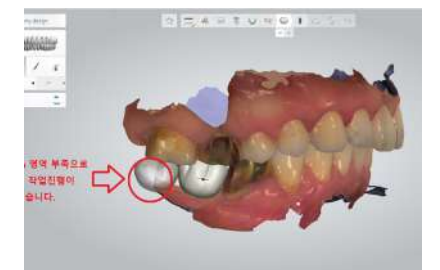

③ 정밀한 석고모델 제작

DIONavi. 진행 시 환자 구강에 정확한 가이드 안착을 위해서는 정밀한 석고모델 제작이 요구됩니다.


석고모델에 변형이 있는지 반드시 확인이 필요합니다.

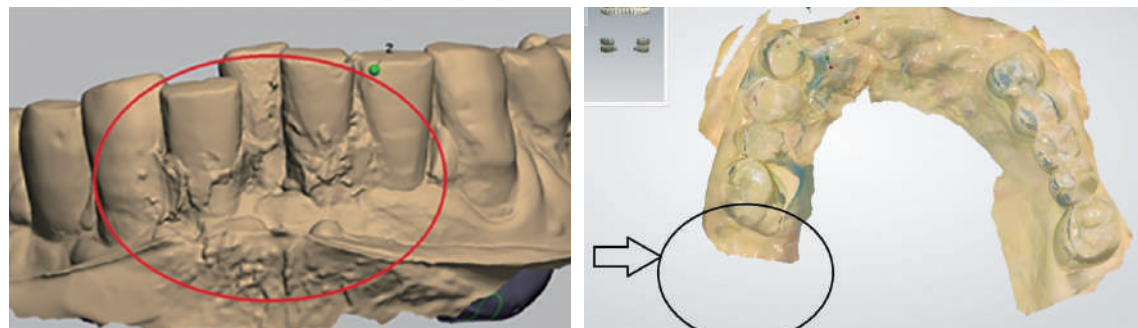

※ 시술 부위는 Silicone 인상재를 권장합니다.

석고모델 오류 Case

인상변형
/ 기포발생

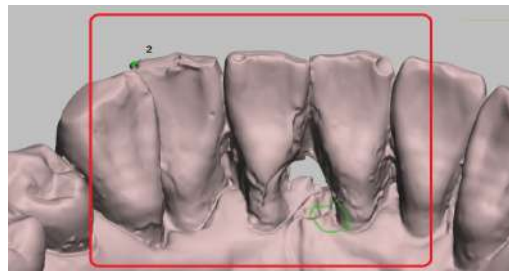

석고모델
파절



④ Case 별 스캔 방법

환자의 구강 상태에 따라

Normal case / Metal artifact case / Partial edentulous case / Edentulous case 중에 선택 가능합니다.


Normal Case

▶ 치과에 TRIOS가 있는 경우

시술 부위 옆 치아에 빈 공간이 없도록 꼼꼼히 스캔

스캔 데이터를 기준으로 Surgical guide를 제작하기 때문에 정확한 인상채득이 필요

- 상악 / 하악 / 하악 모두 스캔
- TRIOS 스캔 후 Color 모드를 흑백으로 전환해서 정밀 체크
- TRIOS 연구소 계정 : DIONavi. 선택
- 파일명 : 병원명 - 환자명

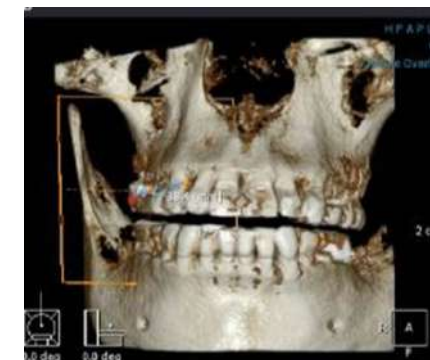

CT스캔 (Open bite로 촬영)



구강스캔 (상악스캔 / 하악스캔 / 교합스캔)

▶ 석고모델로 제작할 경우

- 상악 / 하악 / 하악 모두 인상
- 모델상에 기포나 날카로운 부분이 생기지 않도록 주의




CT스캔 (Open bite로 촬영)



금속보철이 있는 Case

Resin 또는 Marker 부착

- Surgical guide가 제작되는 악궁에 부착
- 시술 부위를 제외한 구강 내 3곳 부착(넓게)
- 교합면을 에어 등으로 건조시킨 후 Flow resin을 충분히 도포한 후 Resin 또는 Marker를 얹고 광중합기로 10초 정도 조사

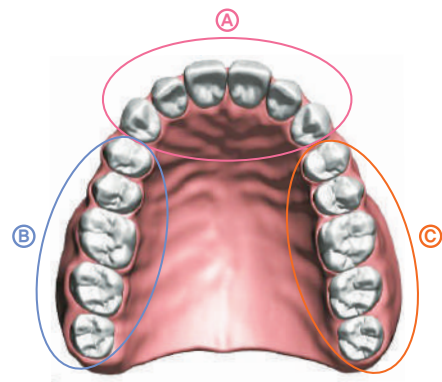


Resin 또는 Marker 부착 기준


- A 구역에 금속보철이 있는 경우 부착
- B 구역에 금속보철이 있는 경우 부착
- C 구역에 금속보철이 있는 경우 부착

※ 각 구역에 연속된 보철물이 존재할 경우, Resin 또는 Marker를 부착


* Temporary crown의 경우 Marker를 부착해야함

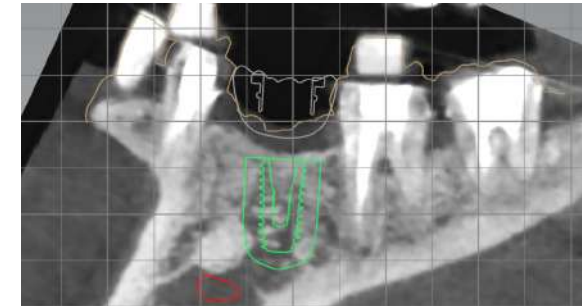

Temporary crown에 Marker 부착 후 CT 촬영

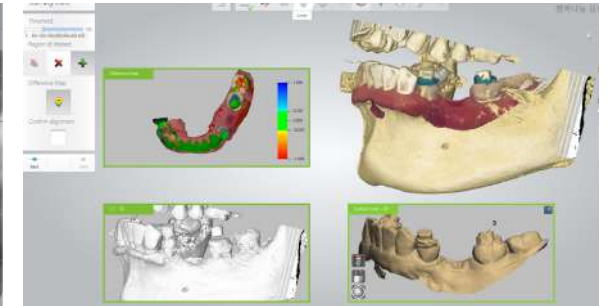


Temporary crown에 Marker 부착 후 구강스캔

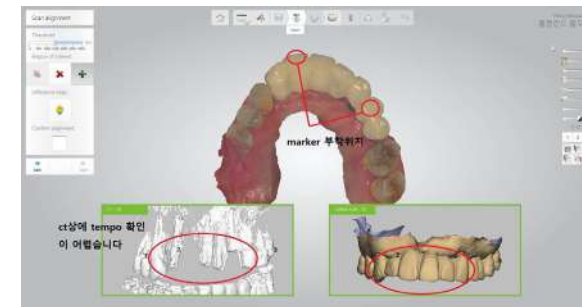

Temporary crown에 Marker를 부착하지 않은 데이터

▶ 치과에 TRIOS가 있는 경우

- ① 시술 부위 악궁에 Resin 또는 Marker 부착 후 스캔
- ② Resin 또는 Marker 부착되어진 상태에서 CT 촬영 (이동 시 떨어지지 않도록 주의 / Open bite)
- ③ Resin 또는 Marker 제거 후 대합치와 교합 스캔

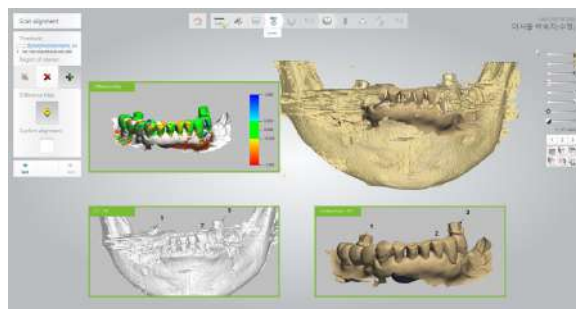

Marker 부착 후 구강스캔



Marker 부착 후 CT 촬영

▶ 석고모델로 제작할 경우

CT 촬영 Resin 또는 Marker 부착 전

- ① CT 촬영을 위해 이동 시 Resin 또는 Marker가 떨어지지 않도록 주의
- ② Resin 또는 Marker가 잘리지 않도록 주의
- ③ Open bite로 촬영

인상채득

- ① Resin 또는 Marker 부착 후 Impression 하여 Stone model 제작
※ Resin 또는 Marker가 인상채득 시 떨어지지 않도록 주의
- ② 상대 대합치 Impression
- ③ Bite 채득
※작업측은 Rubber 인상재료로 채득을 권장



Resin 또는 Marker가 부착된 상태에서 CT스캔 (Open bite)




Resin 또는 Marker를 부착한 상태에서 작업측, 인상채득하여 석고모델 제작



Bite 채득

부분 무치악 Case

▶ 치과에 TRIOS가 있는 경우

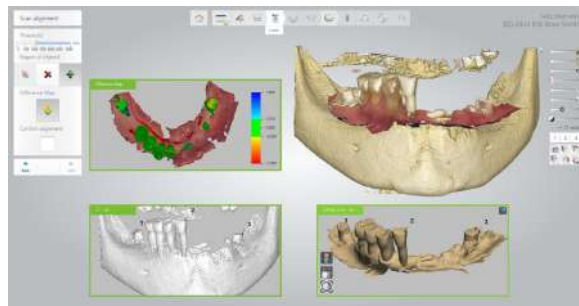


① 작업측 악궁에 Resin 또는 Marker 부착
(Histoacryl 사용할 것)



② 대합치 스캔




③ 바이트 스캔 (단, 바이트 채득이 가능한 경우만)

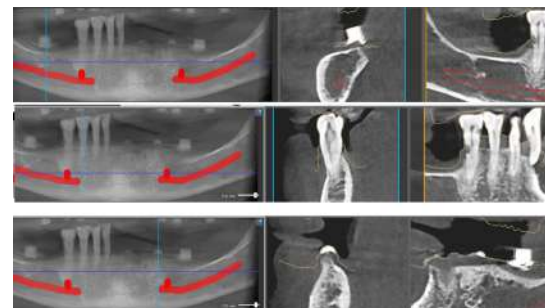

④ Resin 또는 Marker 부착 후 CT 스캔

* Marker 부착 시 주의사항

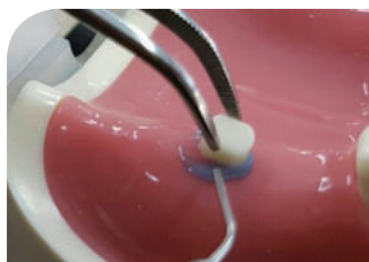

01

Marker를 핀셋으로 잡고 부착할
잇몸 또는 교합면에 위치시킴



02

Flow resin을 도포하고
광중합기로 Curing

🕒 5~10초




03

잇몸에 부착시 Histoacryl 사용,
치아에 부착시 Histoacryl 불필요


🕒 20초

Histoacryl을 이용한 Flow resin 부착하는 방법

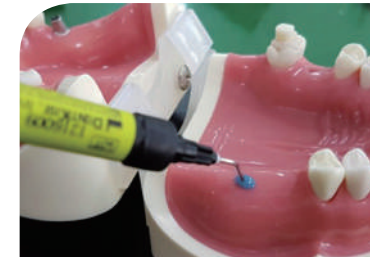

01

부착할 잇몸에 Flow resin을 Pouring

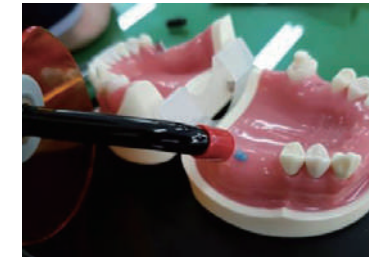

02

광중합기로 Curing

🕒 5~10초



03

Histoacryl을 Resin 주위에 도포



Histoacryl (히스토아크릴)

▶ 석고모델로 제작할 경우



① 상·하악 석고모델을 제작하여 DIOnavi. Center로 배송 (Bite index 불필요)

※ Bite index 있을시 석고모델과 같이 보내주시면, Splint 촬영 후 DIOnavi. Center로 다시 Splint를 배송하지 않아도 됨



② DIOnavi. Center에서 Splint
제작하여 치과로 발송




③ Splint를 이용하여 교합 체크
(Bite + V.D 체크)



④ Splint를 구강에 안착하고 CT 스캔
(Splint 제작 시 Close bite로 스캔)

무치악 Case

▶ 치과에 TRIOS 및 Denture가 있는 경우

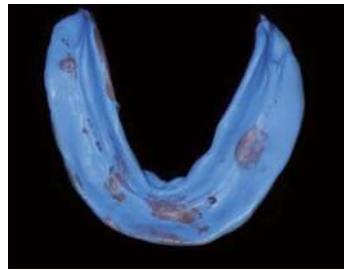

① Denture 내면을 인상재로 Reline



② Denture의 외면에 Marker 부착




③ Denture의 내면/Marker 부위, 치아 스캔



④ Marker 부착된 Denture를 구강 내 안착




⑤ Denture가 안착된 후 Bite 스캔

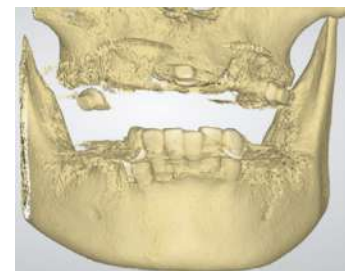


⑥ Denture가 안착된 상태에서 CT스캔


* Denture 이용시 주의사항

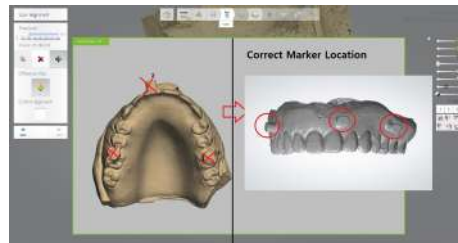

01. Marker 부착 시 주의사항

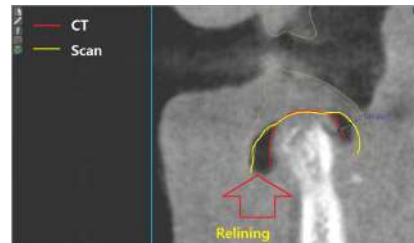

02. Relining 주의사항

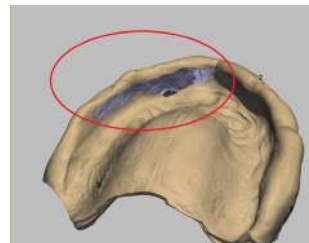

03. Denture 스캔시 주의사항

전치부 1개, 양쪽 구치부 2개 총 3개 부착
Denture의 Border부 가까이에 부착할 것

▶ TRIOS와 Wax denture로 제작할 경우



① 뜨거운 물(44~55도)에 10초간 담지



② 환자 구강에 넣어 내면의 형상을 맞춤




③ Wax denture 내면에 인상재를 넣어줌



④ Wax denture의 외면에 Marker 또는 Flow resin을 부착 후 구강에 안착



⑤ 대합치와 Wax denture의 내, 외면을 스캔

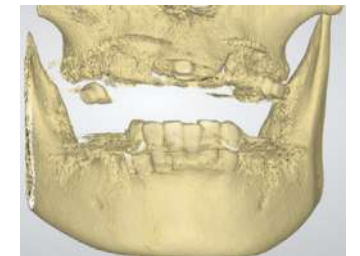

⑥ Wax denture를 안착한 상태에서 CT 스캔

▶ 석고모델과 Splint로 제작할 경우




① 상·하악 석고모델을 제작하여 DIONavi. Center로 배송



② DIONavi. Center에서 Splint 제작하여 치과로 발송




③ Splint를 이용하여 교합 Check

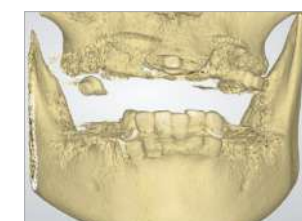

④ Splint를 안착한 상태에서 CT 스캔



Splint 안착이 잘된 Case

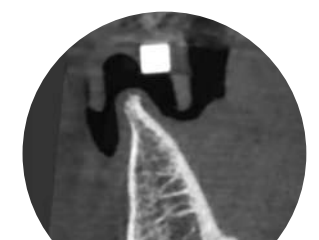


Splint 안착이 잘못된 Case

▶ 석고모델과 Wax denture 로 제작할 경우



① 히스토아크릴을 이용해서
Marker 또는 Flow resin을 구강에 부착

② CT 스캔

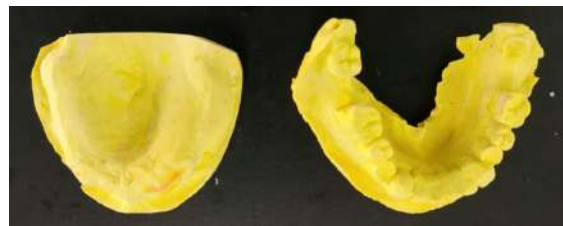

③ 인상채득하여 석고모형 제작
※ Resin 또는 Marker가 인상채득 시 떨어지지 않도록 주의



④ 뜨거운 물 (44~55도)에
10초간 담지



⑤ 환자 구강에 넣어 내면의
형상을 맞추고 Bite 체크



⑥ 상, 하악 석고모형과 Wax denture를
DIONavi. Center로 배송

⑤ 무치악 스캔 - Scan retractor

무치악 구강 스캔의 정확도를 높여주며 스캔 시 방해요소를 제거하여 시간이 단축됩니다.

▶ 활용 방법

- 01 상악 개구부를 명확하게 인식합니다.
- 02 혀/뺨의 움직임을 제어(하악)합니다.
- 03 구강스캔의 기준점 역할을 합니다.

	상악	하악
Scan retractor 사용 전	부착치은, 치조점막등 경계확인 어려움 	혀의 움직임 등으로 구강스캔 불가
Scan retractor 사용 후	상악 개구부 명확한 인식 가능 	혀의 움직임 제어 가능
Scan retractor 형상	상악용 	하악용

* 활용 예 (하악)




Scan retractor를 악궁에 맞게 선택하고 구강에 맞게 구부려서 적합을 맞춰 사용

▶ 사용 방법

- 01 Scan retractor를 사용할 부위 주변에 건조하지 않게 적절한 수분 유지
- 02 수술용 장갑을 착용한 상태에서 구강 내에 손가락을 넣어 한쪽 입꼬리를 치아로부터 들어 올려 Scan retractor의 한쪽 모퉁이부터 구강 내로 삽입
- 03 입술이나 뺨이 Scan retractor에 눌린 부위가 없게끔 손가락으로 확인
- 04 구강스캔을 진행하는 동안 Scan retractor의 손잡이를 잡아서 구강 내에서 움직임이 없도록 유지
- 05 사용을 마친 후 환자의 마른 입술이 상하지 않도록 조심스럽게 환자 구강 내에서 Scan retractor를 제거



▶ 스캔 순서

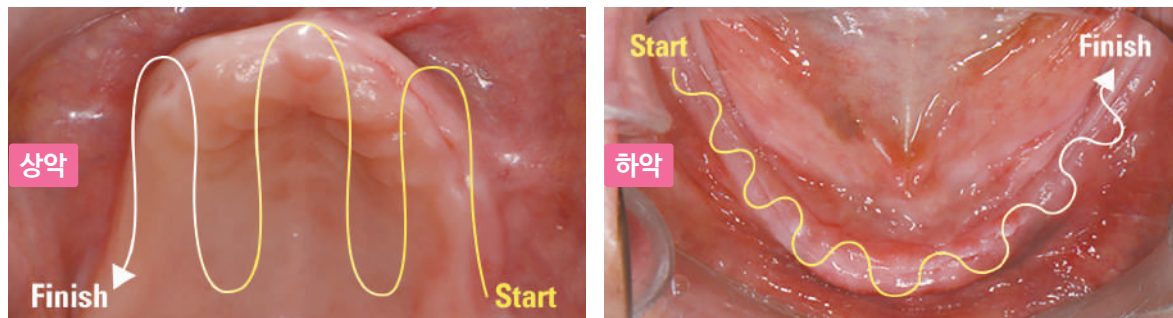


상악 왼쪽 구치부 → 전치부 → 왼쪽 구치부 구개측
→ 구개측 중심부에서 전치부 → 전치부에서 오른쪽 구개측
→ 전치부에서 오른쪽 구치부

하악 오른쪽 구치부 → 전치부 → 하악 왼쪽 구치부
(이동 시 협측-설측/순측-설측 지그재그 형태로 스캔)

▶ 사용 시 주의사항


- 01 환자의 구개부가 과도하게 평탄한 경우 스캔 어려움
- 02 Scan retractor가 움직이지 말아야 하며, 과도한 연조직 확장이나 압박 주의
- 03 스캔 시 환자는 코로 숨을 쉬고 움직이지 않아야 함

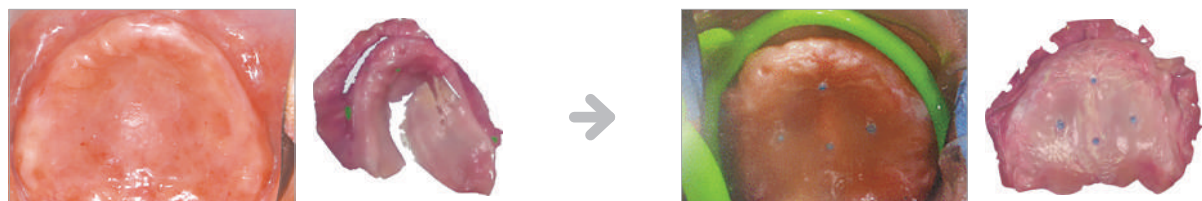

Flow resin을 구개부에 부착 후 스캔

디오나비의 모든 것!

디오나비 카카오톡 플러스 친구가 알려드립니다.

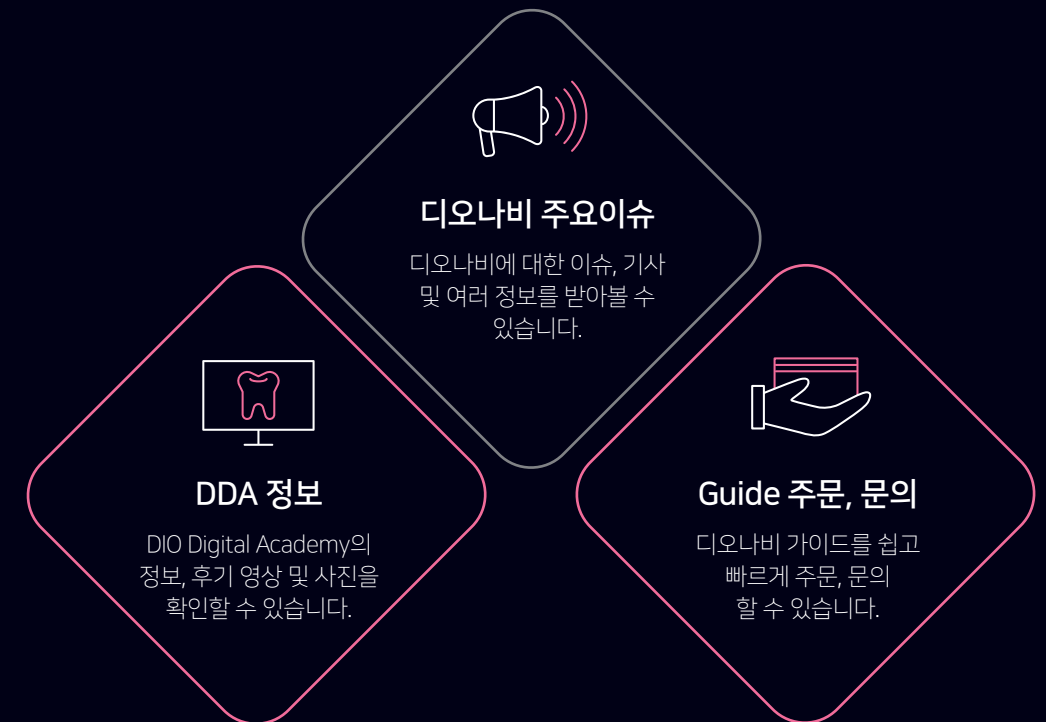


← 카카오톡으로 확인하기!

이 모든 것을 디오나비 카카오톡 플러스 친구에서 만나보세요.

3 주문 Process

① DIONavi. PC 사이트 회원가입

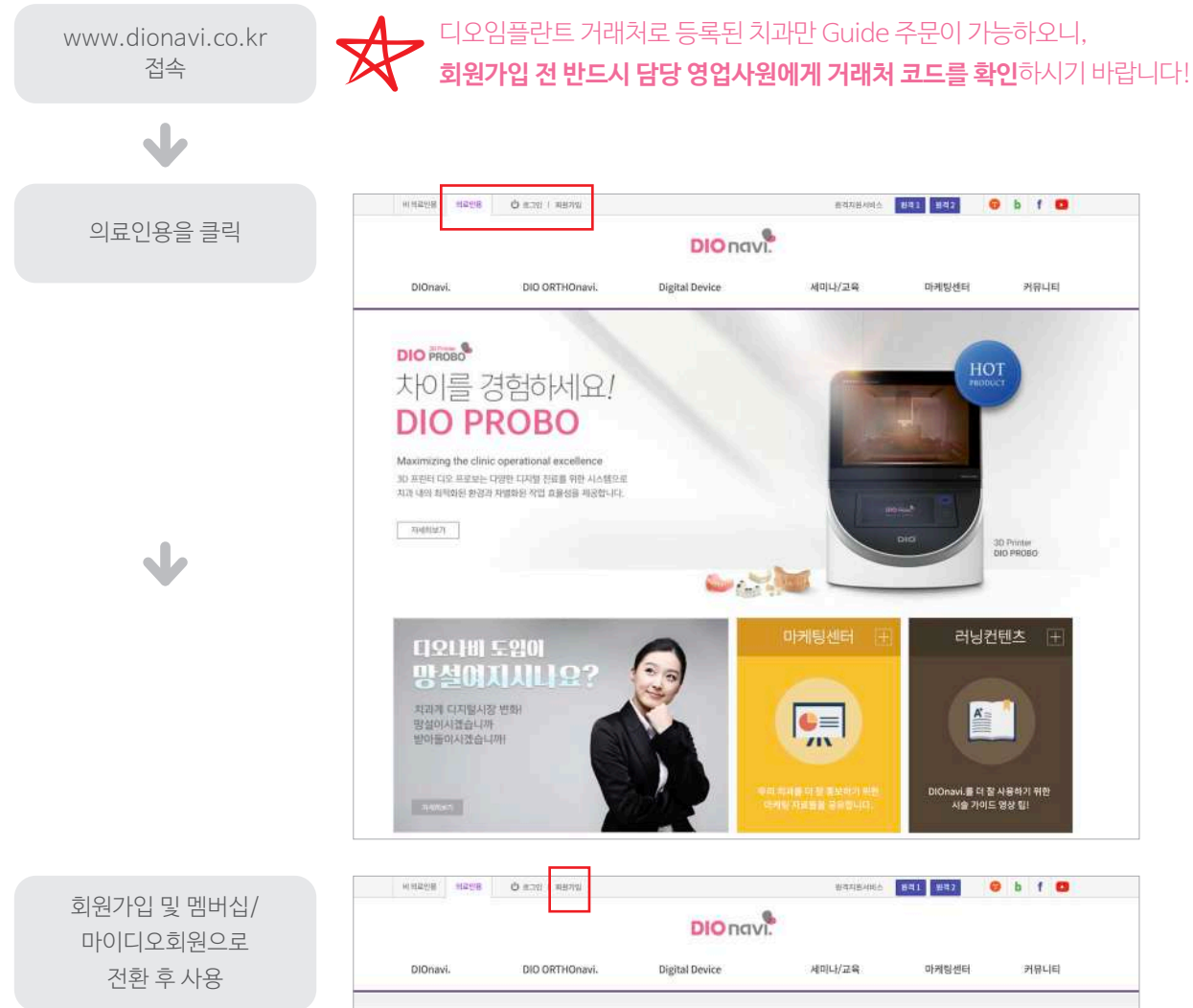

★ 디옴플라트 거래처로 등록된 치과만 Guide 주문이 가능하오니, 회원가입 전 반드시 담당 영업사원에게 거래처 코드를 확인하시기 바랍니다!

▶ 일반 회원의 경우

➔ 마이디오회원 전환 필요

★ 아래와 같은 메시지 발생시
영업사원에게 문의하여
거래처 등록 요청하시기 바랍니다!

www.dionavi.co.kr 내용:
입력한 사업자 등록번호와 일치하는 자료를 찾을 수 없습니다.
당사 영업 직원을 통해 거래처 정보 등록 후 다시 실행 해주세요!

▶ 정상적으로 처리 된 경우

➔ 추가 정보를 입력 후 회원 전환

▶ 이미 등록되어 있는 거래처의 경우

➔ 기존 ID 를 확인 후 기존 ID 를 사용

마이디오회원 전환
마이 디오회원으로 전환하시면 다양한 서비스를 이용하실 수 있습니다.

마이디오회원(거래처등록)이 필요합니다.
주문/주문확인 및 다양한 서비스 이용을 위해 **회원전환**을 해주세요.
• 회원전환 오류 및 이용에 불편함이 있으시면 051-745-7875(7868) 고객센터로 문의주세요.

회원전환을 위해 Internet Explorer 버전 10 이상에서 사용하시길 권장드립니다.

아이디	비밀번호
회원명	이메일
직과 / 기공소명	
별 바깥번호 *	
사업자 등록번호 *	주요 *는 제외하고 번호만 입력하세요!

www.dionavi.co.kr 내용:
마이디오후 ID와 비밀번호를 입력 후 [전환버튼]을 클릭하세요.

확인

www.dionavi.co.kr 내용:
이미 마이디오후 회원입니다. 아래 정보로 다시 접속하여 주십시오.

확인

회원정보 | 회원전환을 위해 Internet Explorer 버전 10 이상에서 사용하시길 권장드립니다.

아이디	비밀번호
회원명	이메일
직과 / 기공소명	
별 바깥번호 *	
사업자 등록번호 *	주요 *는 제외하고 번호만 입력하세요!


마이디오후 회원정보 | 마이디오후 회원의 가입시 입력하신 정보입니다.

마이디오후 ID *	rod	직과 별.의원 기공소명	로터
------------	-----	--------------	----

위의 ID로 사용 * 체크를 할 경우 위와 같이 로그인 합니다.

회원 구분 *	직과	사용인여 *	한국어
비밀번호 *	비밀번호 확인		
무관번호 *	주소 *	무산명주소 *	
담당자 정보 1 *	김		rodem1875@naver.com

▶ ID, 비밀번호를 모를 경우

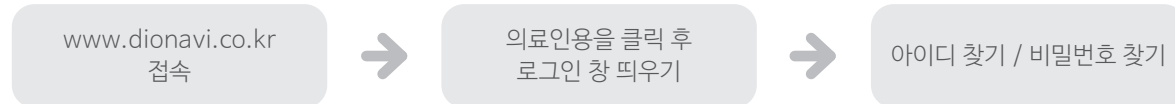

● 일반사용자? 디오거래처?

**디오
거래처**


주문이 가능한 마이디오
회원 전환을 한 사용자

**일반
사용자**

주문이 불가능한 마이디오
회원 전환을 하지 않은 사용자

② DIONavi. 모바일 사이트 이용방법

★ 디오나비 모바일 사이트는 **주문내역만 확인 가능**

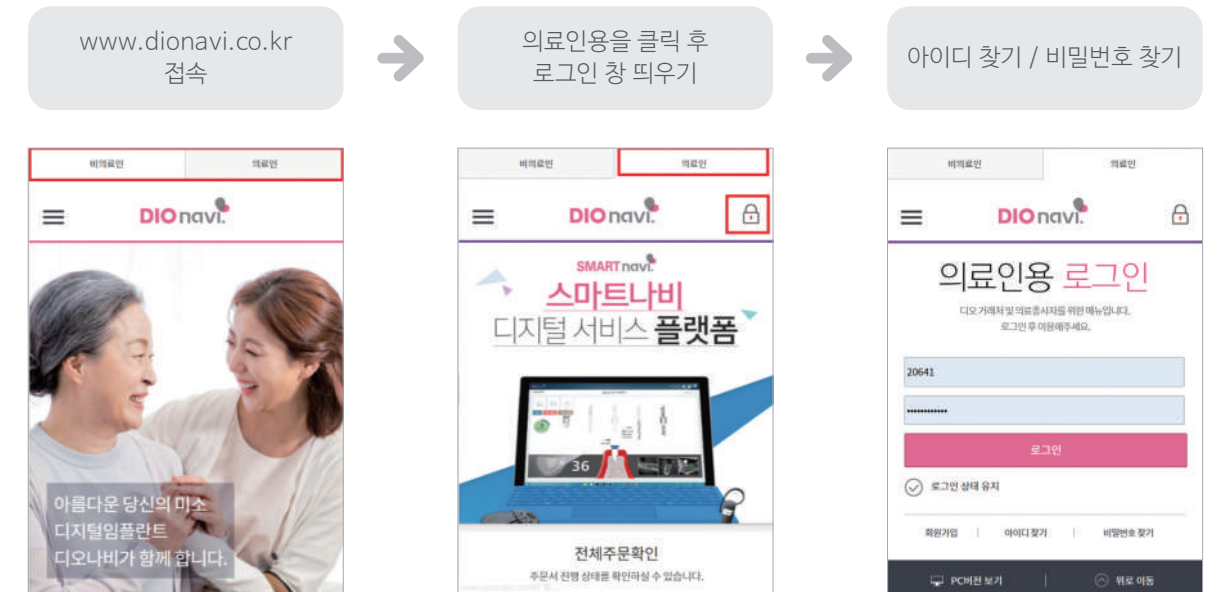


▶ 모바일 사이트 주문내역 확인방법

● 거래처 이름
자신의 이름이 상단에 표시

● 상태
현재 주문상태를 확인 가능함

진행상태에 따른 주문내역 확인 가능

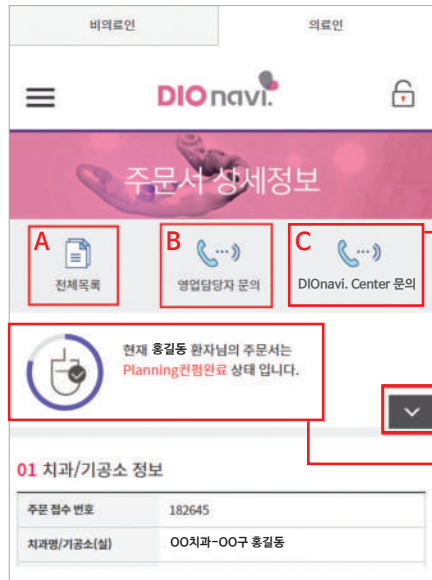

A 전체목록

상세보기에서 다시 전체 리스트 화면으로 돌아갈 수 있음

B 영업담당자 문의

C DIONavi. Center 문의

상태

클릭을 하게 되면 상태 변경된 내역을 Slide down 형태로 보여줌

상태

현재 주문서의 상태를 보여줌

01 치과/기공소 정보	
주문 접수 번호	182722
치과명/기공소(실)	OO치과-OO구 홍길동
배송지 정보	홍길동 부산시 해운대구 센텀서로 우(123456)
주문 담당자 연락처/이메일	홍길동 010-0000-0000 ABC@naver.com
	아무개 010-0000-1234
	갑을병 010-0000-5678
영업 담당자 연락처/이메일	김영업 010-0000-1111 DIO@dio.co.kr

주문 접수 번호

치과명/기공소(실)

배송지 정보

주문 담당자 내역

영업 담당자

*** 주문 내역 정보 확인**

02 환자기본정보	
환자 이름	김항자
환자 연령대	40대
환자 성별	남자
전신병력기록	고혈압 /
03 주문정보	
Guide 디자인을 위한 정보	
패키지/일반 선택	P101170927-0002
Surgical report	김항자_SurgicalReport.pdf
Drilling protocol	
담당팀	DIONavi. DESIGN 2팀 (051-745-7845)
디오나비비 피견	[2019-04-17 12:06:16.993] 안녕하십니까 DIONAVI DESIGN입니다. (051-745-7939) 디자인을 통한 사출한 가이드 제작 및 식립방법 확인이 필요됩니다. bone flattening drill 및 abutment profile drill을 권장방법을 사용 바랍니다. #47 bone density 및 초기고정 확인이 필요합니다. 인접치근과 인접하여 사출 시 식립방향확인이 필요합니다. 신관과의 거리가 인접하여 사출 전 확인이 필요합니다.

병원 피견	
Upload 파일정보	2.jpg 참고(산관거리).jpg 1(47).jpg 김항자_SurgicalReport.pdf 김항자 18-0392_20190416_154413.zip
Guide 정보	Guide /
Abutment 정보	해당없음 /
Temporary Crown	
Planning 주체	DIO에서 Planning
ITEM	Trios Scan
수술 예정일	2019-04-23 [오전]
수술 의사	김원장
사출위치	/ 47
사출 Case	해당 없음 /
요청사항	47 guide 22일 도착예정 / 23일 오전 11시 수술입니다. # 47 guide 3번째 제작
Abutment 제작을 위한 정보	



③ DIONavi. Guide 주문방법

01 치과/기공소정보

치과명/기공소(실) *

IT전략

배송지 정보 *

IT전략: (612020) 부산 해운대구 우동

IT전략

휴대폰번호

612020

부산 해운대구 우동

배송메세지를 입력해주세요.

주문 담당 연락처/이메일 *

원장님

01012345678

ABC@naver.com

실장님

01000001234

DFG@korea.com

디오나비 담당스텝

01012340000

DIONavi@hanmail.net

영업담당자 연락처/이메일 *

김영업

01000001111

DIO@dio.co.kr

02 환자기본정보

환자 이름 *

환자 연령대 *

환자 성별 *

전신병력기록 *

03 주문정보

Guide 디자인을 위한 정보

패키지/일반 선택 *

일반

ITEM *

Trios Scan

식고모델

Trios 외 구강스캐너

Splint

Planning 주체 *

DIO에서 Planning

Clinic자체 Planning

가공 주체 *

DIO

Clinic

Sleeve 종류 *

locking

non-locking

파일 업로드 시 주의사항

1. CT 파일은 압축하여 ZIP 파일로 업로드 바랍니다.

2. 네모 박스 안에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 추가 또는 삭제가 가능합니다.

3. 오류발생시 디오 DIONavi팀(051-745-7868 / 7750) 으로 문의주세요.

CT 구강스캐너(STL) 파일 첨부 *

이름

크기

선택된 파일이 없습니다. 파일을 추가하십시오.

0 개체, 0KB 첨부됨 | 최대 5 개, 5GB

Panorama/ Planning 파일 첨부 *

이름

크기

선택된 파일이 없습니다. 파일을 추가하십시오.

0 개체, 0KB 첨부됨 | 최대 5 개, 5GB

배송지 입력 및 확인

치과담당자 연락처확인

환자 이름, 연령, 성별, 전신병력 기록입력

패키지 선택

스캔유형 선택, Planning 및 가공 주체 선택

Clinic에서 가공 시 Sleeve 종류 선택

CT, 구강스캔 파일 업로드

Panorama / Planning 파일 업로드

Guide 정보*

Guide

Anchor

시술위치 *

18 17 16 15 14 13 12 11

21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41

31 32 33 34 35 36 37 38

시술 Case *

☒ Sinus
☐ 발치즉시
☐ GBR
☐ 무치악
☐ 일반
☐ 해당없음

수술 예정일 *

☐ 오전
☐ 오후

*Clinic 자체 Planning은 최대 3박4일 안에 제품을 받아보실 수 있습니다.

요청사항

Implant 식립 위치 선택

시술 Case 분류 선택

수술 예정일 입력

디오나비 가이드 관련 요청사항

보철물은 디오에서 제작하지 않습니다. 스캔 파일은 거래하시는 기공소에 전달되며, 기공소와 협의하시기 바랍니다.

Abutment 정보*

☒ Customized Abutment
☐ Digital Abutment
☐ Abutment Jig
☐ 해당없음

Temporary Crown*

☒ Temporary Crown

보철물 제작 주체*

☒ 자체 기공소
☐ 기공소명 입력
☐ 기공소 메일 주소 입력

치과에서 주문할 제품 선택

거래하는 기공소 정보 입력

주문 상세내역 입력(Abutment 제작을 위한 정보)

* 표시는 필수 입력항목입니다.

No	Fixture No. *	Connection Type *	Margin Type *	Draft Angle	Shoulder Width	Gum	Cuff	최종 보철물 *	
12	UF(II) HEX	HEX	EQ	Length	Angle	Width	미선택	미선택	Zirconia
13	UF(II) HEX	HEX	EQ	Length	Angle	Width	미선택	미선택	Zirconia
17	UF(II) HEX	HEX	EQ	Length	Angle	Width	미선택	미선택	Gold Crown

Single/Bridge 선택(Temporary Crown)

* 표시는 필수 입력항목입니다.

치식에 상술 또는 브릿지로 제작할지 선택하여 주세요. *

18 17 16 15 14 13 12 11

21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41

31 32 33 34 35 36 37 38

보철물 설정

상술 설정

Customized abutment 주문정보 선택

치식 / Connection / Margin / 최종보철물

Temporary crown Single / Bridge 위치 선택

ex) Single 또는 Bridge로 제작할 치식을 따로 체크하여 설정하기

기타/요청사항

주문서 일시저장

주문서 접수


디자인 시 고려해야 하는 요청사항

주문서 완료버튼 클릭

* 디오에서 제작



* 기공소에서 제작

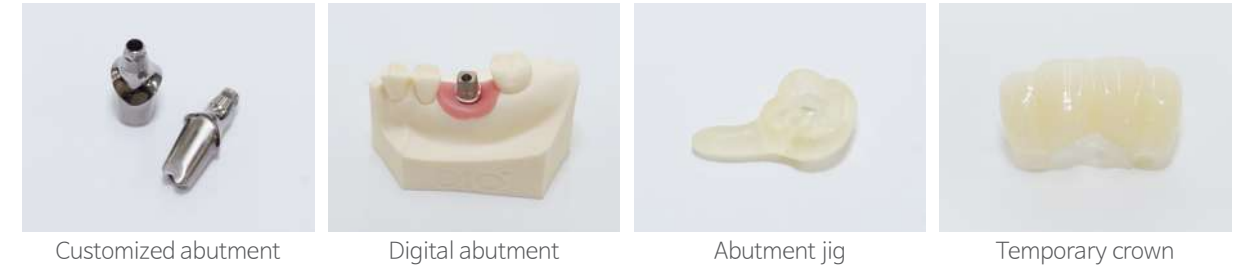

디오나비 주문서 작성

홈 > DIONAVI > 주문하기 > 디오나비 주문서 접수 완료

STEP 1

STEP 2

STEP 3

01 치과/기공소정보

주문 접수 번호

198064

치과명/기공소(별)

IT원리

배송지 정보

IT원리

주문 담당 연락처/이메일 *

01068231227 | spawn000@nuver.com

영업담당자 연락처/이메일 *

노기선 | 010-4028-5493 | spawn000@dio.co.kr

02 환자기본정보

환자 이름

홍길동

환자 연령대

20대

환자 성별

남자

전신병력기록


☒ 해당 없음
☐ 고혈압
☐ 당뇨병
☐ 심장질환
☐ 기타

주문서 접수 완료

주문이 완료되면 환자의 정보를 다시 한번 확인


4 DIOnavi. Surgical Guide Design

④ Implant studio에서 Planning file을 접수하는 방법

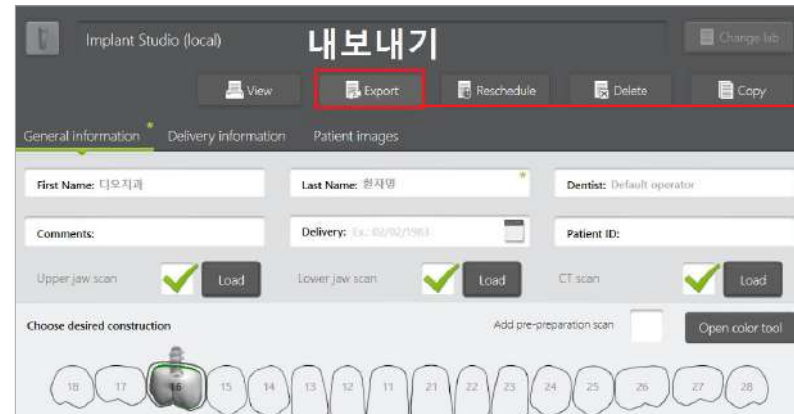


수술 예정일 입력

Implant studio에서
Planning file 내보내기
클릭

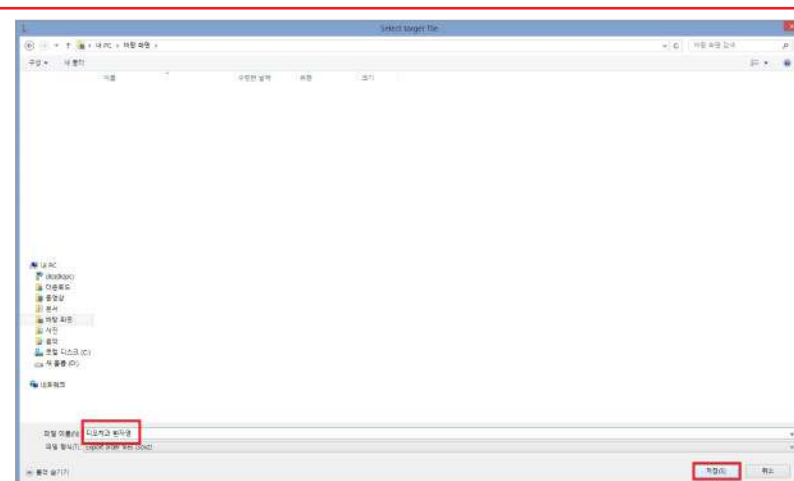


3Dx 파일 업로드

압축과정 필요 없이
3Dx파일을 사이트
주문서에 파일 업로드

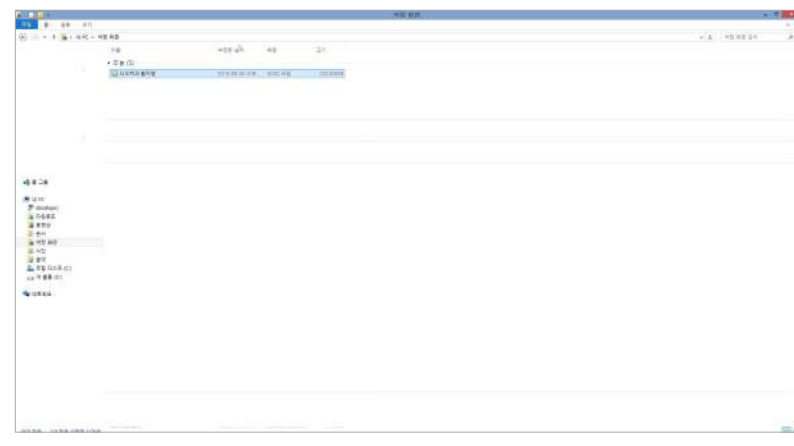


3Shape Implant studio를 이용한 Design process

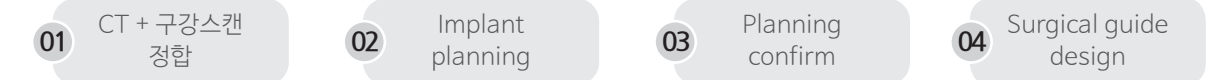


① 정합

▶ CT와 스캔 데이터를 정합할 때 공통된 치아의 면적 내에 특징적인 부분을 선택하여 정합하게 됩니다.

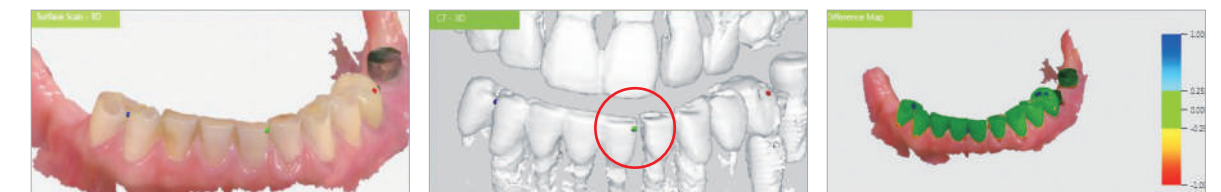


주의 반드시 CT스캔할 때와 구강스캔, 인상채득 시 구강의 환경이 동일하여야 합니다.

▶ Open bite로 스캔합니다.

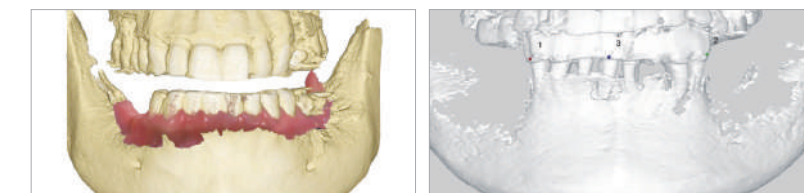

주의 Close bite로 촬영 시 치아의 정보가 제대로 나오지 않는 경우가 많아 정합이 어려움으로 Open bite로 스캔합니다.

② Implant planning

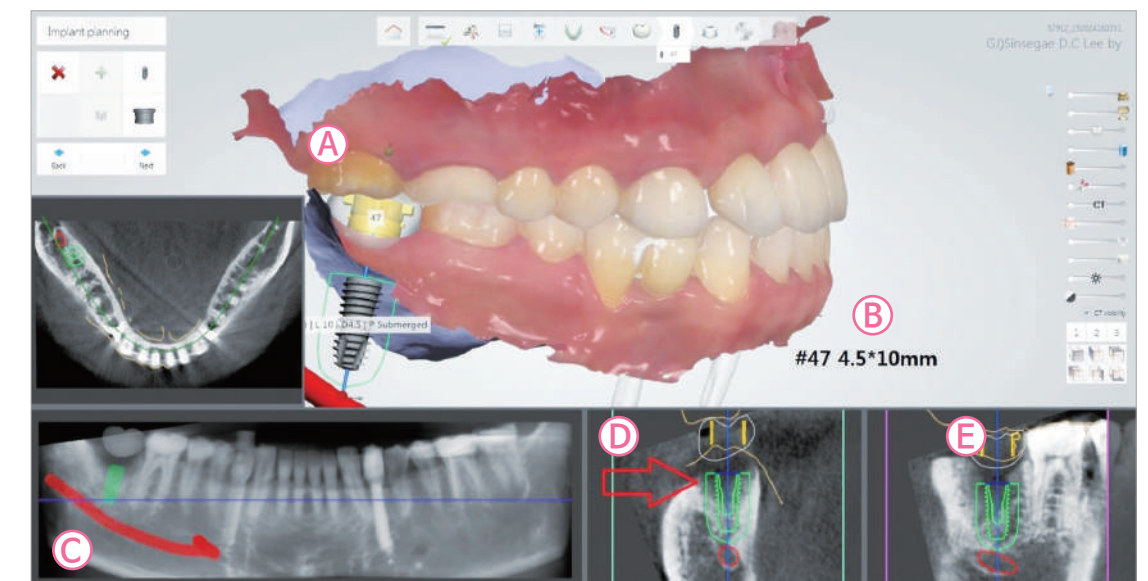


Ⓐ Scan-View : 보철물의 관계 확인

Ⓑ 해당 치식의 Fixture 정보

Ⓒ Panoramic view


Ⓓ Buccal-Lingual view

Ⓔ Mesial-Distal view

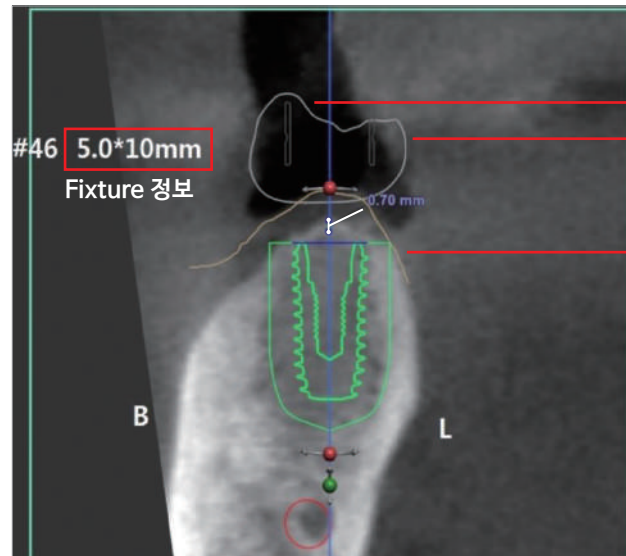

Sleeve
Virtual teeth


스캔 line

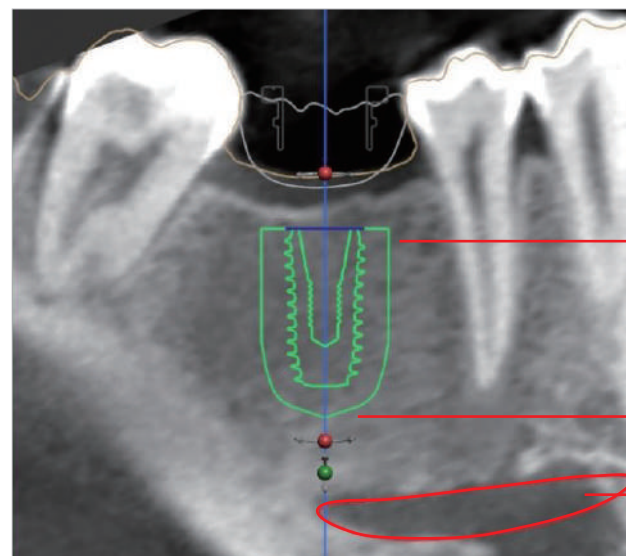

옆부분 안전거리 1.5mm

밑부분 안전거리 2.0mm

하악신경

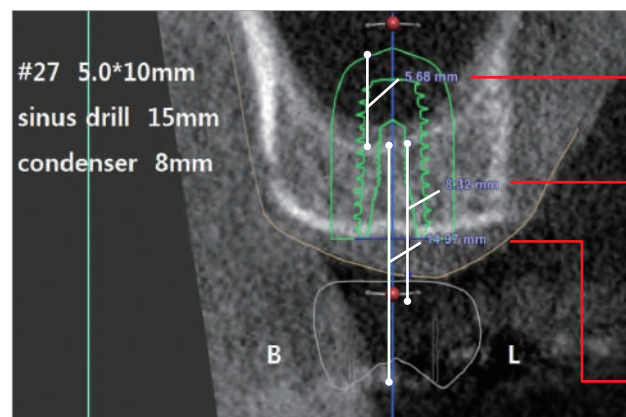

Sinus lift 해야 하는 높이

잇몸부터 Sinus wall 까지의 거리,
Bone graft 할 때 Bone을 밀어
넣는 Bone condenser의 길이,
이 수치를 이용하여 Stopper
길이를 선택


Sleeve top에서 Sinus wall
까지의 거리, Drill의 길이 및 사용
하는 Stopper의 길이를 알 수 있음

주변 해부학적 정보와 Implant의 위치를 확인할 수 있습니다.
뼈의 White balance를 참고하여 골질을 판단할 수 있습니다.

▶ DIONavi. Guide 주문내용 확인



DIONavi. 주문확인 클릭

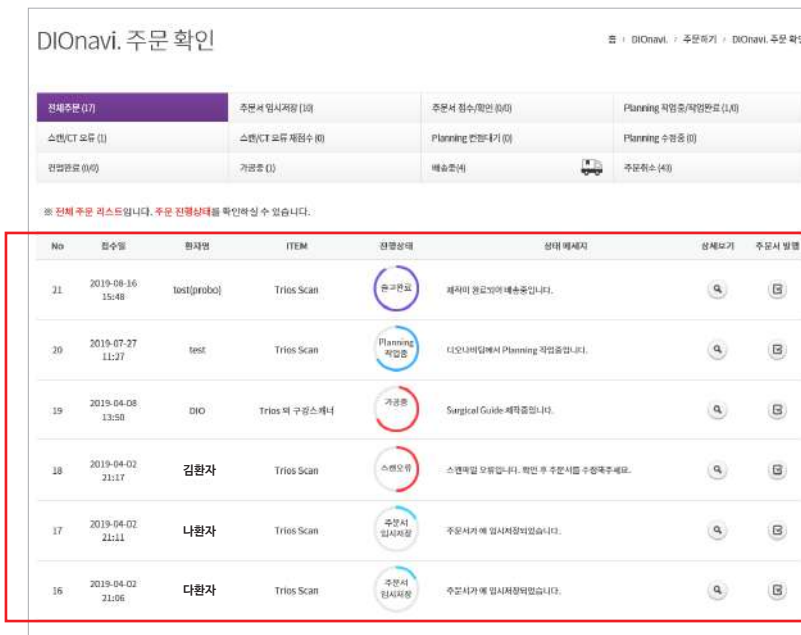

주문 진행상태 확인

출고 완료, 작업중,
가공 중 등의 주문
진행상태 확인 가능

▶ 주문 후 확인사항

스캔 / CT오류 발생



스캔 / CT 오류

- 스캔오류 주문 확인 가능
- 오류 메시지 확인 후
주문서 재수정, 접수



상세내용 확인
돋보기 클릭 시
DIONAVI. Center 의견 및
오류분석 확인 가능

스캔 / CT 파일 재접수

전체주문 (17)	주문서 임시저장 (10)	주문서 접수/확인 (0)	Planning 작업중/확인완료 (10)
스캔/CT 오류 (4)	스캔/CT 오류 재접수 (0)	Planning 전달 대기 (0)	Planning 수검중 (0)
변형완료 (0)	가공중 (1)	배송중 (0)	주문취소 (0)

CT / STL
파일 다시 업로드 *

이름

크기

CT 다시 업로드.zip

197.10MB

1 차례, 197.10MB 원본파일

최대 5 개, 5GB

파일들 수정하여 다시 업로드 할 경우 사용

Panorama/Planning
파일 다시 업로드 *

이름

크기

다시 업로드 27999_190711180304.3.png

278.31MB

1 차례, 278.31MB 원본파일

최대 5 개, 5GB

파일들 수정하여 다시 업로드 할 경우 사용

주문서 재접수

주문취소

재접수
파일을 재 업로드 후
주문서 재접수를 클릭

※ 스캔/CT 파일 오류로 재 접수권 권합니다.

No	접수일	환자명	ITEM	진행상태	상태 배제지	상세보기
1	2018-01-12 17:57	김환자	Tris Scan	재접수 확인중	스캔파일 오류 재 접수 내역을 확인하고 있습니다.	

재접수 후 상태
변경 확인

03 주문정보

Guide 디자인을 위한 정보

제키지/업로드 선택 *

P110180326.0001

첨가 - Upload 파일 정보 *

이름

크기

CT 다시 업로드

197.10MB

다시 업로드 27999_190711180304.3.png

278.31MB

2 차례, 475.41MB

전체복합

재접수 내역 확인

③ Planning confirm

전체주문 (0)	주문서 임시저장 (0)	주문서 접수/확인 (0)	Planning 작업중/확인완료 (0)
스캔/CT 오류 (0)	스캔/CT 오류 재접수 (0)	Planning 전달 대기 (0)	Planning 수검중 (0)
변형완료 (0)	가공중 (0)	배송중 (0)	주문취소 (0)

※ Planning에 대한 승인 요청입니다. Planning 파일 이상 없을 경우 승인확인해주세요.

No	접수일	환자명	ITEM	진행상태	상태 배제지	상세보기
2	2019-07-10 11:06	최준자	식고모델	Planning 전달 대기	Planning (중간확인) 대기중입니다. (중간확인) 확인해 주세요.	
1	2019-04-26 12:43	전민석	식고모델	Planning 전달 대기	Planning (중간확인) 대기중입니다. (중간확인) 확인해 주세요.	

Planning 컨펌 대기
DIONAVI. Center에서
Planning 한 파일을
최종확인 해주셔야 Guide
제작을 진행 가능

상세내용 확인
돋보기 클릭 시
디오나비팀 의견 및
오류분석 확인 가능

디오나비팀 의견

[2019-07-15 15:03:05.787] - 반영하심나해
DIO NAVI DESIGN입니다. (051-745-7803)

시술전 CT 촬영을 통한 가이드 안착확인 및 식입영상 확인이 필요합니다.

식고모델 case로 가이드는 식고모델 스캔파일 기준으로 제작됩니다.

crowding으로 인해 가이드 내면적면 확인이 필요할 수 있습니다.

식고안상변형으로 인해 가이드 내면조정이 필요할 수 있습니다.

lingual로 hole이 형성되어 hole 병합확인이 필요합니다.

#43 narrow kit 사용됩니다.

관목이 좁아 drilling시 drill이 매김어싱수 있어 단계별 drilling이 필요합니다.

-labial에 thread가 노출되어 GBR이 필요하여 lingual cortical bone이 강해 drilling시 drill이 매김어싱수 있어 단계
별 drilling이 필요합니다.

Planning confirm
확인사항
- DIONAVI.를 주문했던
DIONAVI. Site에서
Planning confirm 가능
- Planning confirm 시
작성된 의견 확인 가능

Surgical report

최준자_SurgicalReport.pdf (0)

담당팀

DIONAVI.팀 (051-745-7750)

Planning 파일정보 *

이름	크기
1 (43).jpg	434.91KB
2.jpg	355.04KB
장고1.jpg	248.54KB
최준자_SurgicalReport.pdf	099.60KB

4 개첨, 1.65MB

신뢰파일 다운로드

바로열기


원래파일 다운로드

병원 의견

디자인 캡처 파일

1(25).jpg

이미지 클릭 시 확대

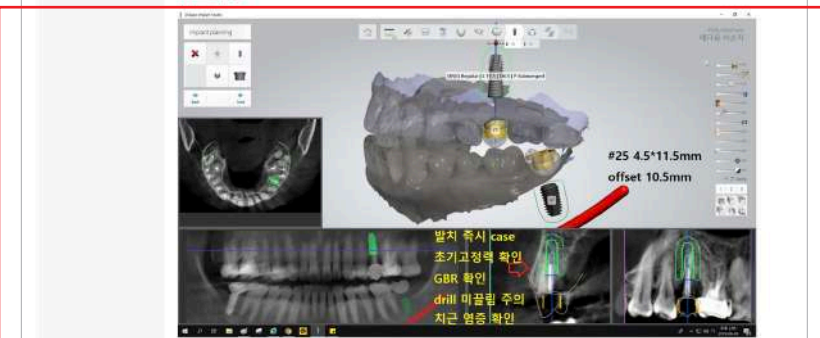

Comment
수정사항에 대한 Comment
작성 후 등록 버튼 클릭

디오나비팀

1(25).jpg

2019-07-15 15:03:05.787

등록

※ 컨펌 전 아래 내용을 참고하세요.

시술 전 참고사항-식립 깊이	>
시술 전 참고사항-식립 방향	>
시술 전 참고사항-CA 체결시	>
Surgical Guide Fix/Anchor KIT	>
시술시 참고사항	>
제작기간 안내	>
Surgical Guide 안내	>


[Planning 재수정요청](#)
[Planning 컨펌 완료](#)

[주문서 취소](#)

- Planning 재수정요청**
Planning 내용의 수정사항을 Comment 한 뒤, 수정요청 클릭
- Planning 컨펌 완료**
Planning 내용을 컨펌하는 경우 클릭

④ Surgical guide design

Surgical guide의 Design은 스캔 데이터를 기준으로 합니다.

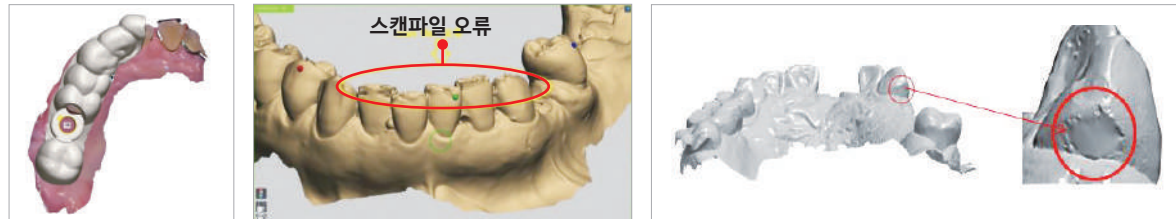

주의 스캔 데이터가 정확해야 구강에 딱 맞는 Surgical guide가 제작됩니다.

주의 석고모델이나 스캔의 오류가 있으면 Guide 장착이 안 됩니다.

▶ DIO PROBO로 주문시 가이드 파일 다운로드 방법

전체주문 내역	주문서 상세내역 (20)	주문서 상세내역 (20)	Planning 주문서/제출완료 (10)
스캔CT 모두 (1)	스캔CT 모두 삭제 (0)	Planning 진행도 (0)	Planning 수정종료 (0)
진행완료 (0)	가공물 (1)	배송중 (1)	주문취소 (0)

※ 배송중입니다.

No	접수일	환자명	ITEM	진행상태	상대 메시지	상세보기	배송조회
4	2019-06-16 15:45	test(probo)	Trios Scan	출고완료	제작이 완료되어 배송중입니다.	상세보기	영업지원 문의
3	2018-07-30 18:22	test	Trios Scan	출고완료	제작이 완료되어 배송중입니다.	상세보기	영업지원 문의

Clinic Guide File

이름	크기
※ 치과용 등차중 가이드 (0)	5.43MB

1 개체 5.43MB

[선택파일 다운로드](#)
[바로열기](#)
[전체파일 다운로드](#)

배송중
DIONavi. 주문확인

배송 상세보기
돋보기 클릭 시 상세보기 클릭

Clinic guide file에서 파일 다운로드

* DIONavi. 제품 및 Protocol 수령 후 확인사항

Offset 9.0mm

Case 4 #36, #46

UF(II) 5010
UF(II) Fixture Ø 5.0 x 10mm

구분	Speed	Max Torque
Drilling	100 rpm	55 Ncm
Fixture	30 rpm	35 Ncm

Implant information		
Implant position (FDI)	36	37
Manufacturer	DIO	DIO
Type	UF(II) 5010	UF(II) 5008
Order number	UF(II) 5010	UF(II) 5008
Length, mm	10	8.5
Diameter (Ø), mm	5	5
Color	Green	Green
Sleeve information		
Name	DIO GS 53	DIO GS 53
Type	Fully guided	Fully guided
Order number	GS 53	GS 53
Offset, (mm)	9	10.5
Drill information		
Minimum drill length	19	19

Drilling protocol offset 확인


TIP 수술 시 수술실에 Report 붙여 참고!

DIONavi. 사이트에 업로드 되어진 파일에서 확인

- [Surgical report.pdf \(1.8MB\)](#)
- [Drilling protocol.pdf \(204KB\)](#)


* DIONavi. Protocol 검색방법

DIONavi. 메뉴에서 Drilling sequence 검색

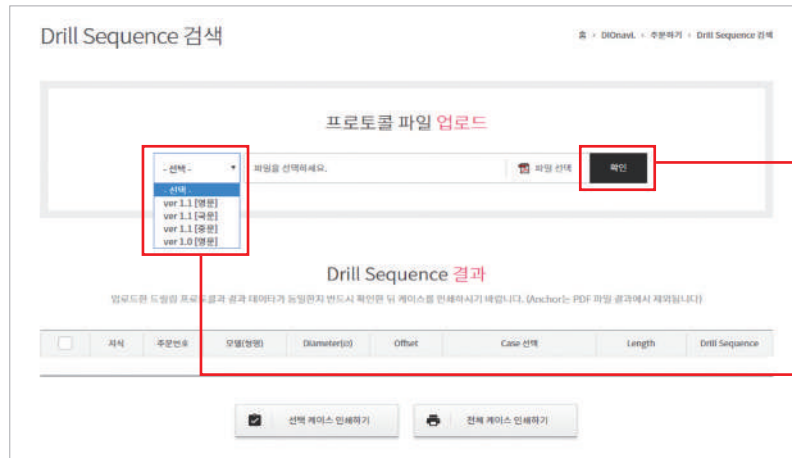


PDF 파일 등록
3shape 에서 제공하는
PDF 파일을 등록하여
확인 버튼을 이용, 데이터 추출

버전 정보 선택
PDF file 버전에 맞는
버전을 선택

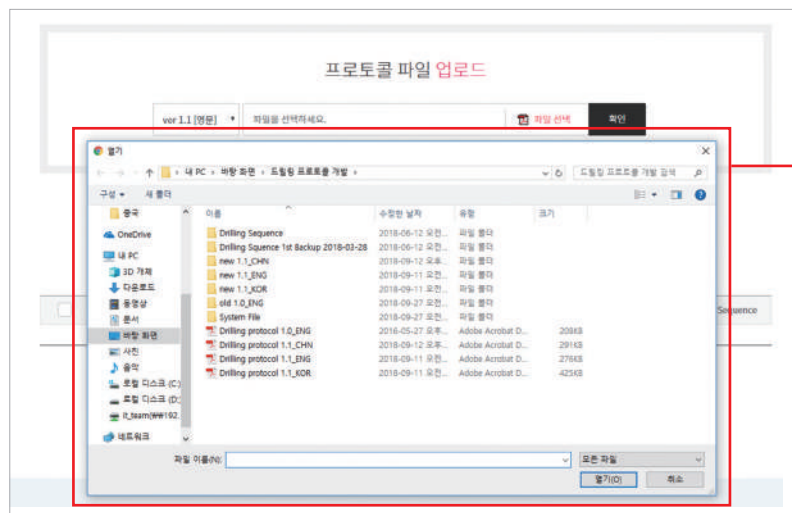


PDF 파일 등록
3shape 에서 제공하는
PDF 파일을 선택, 등록

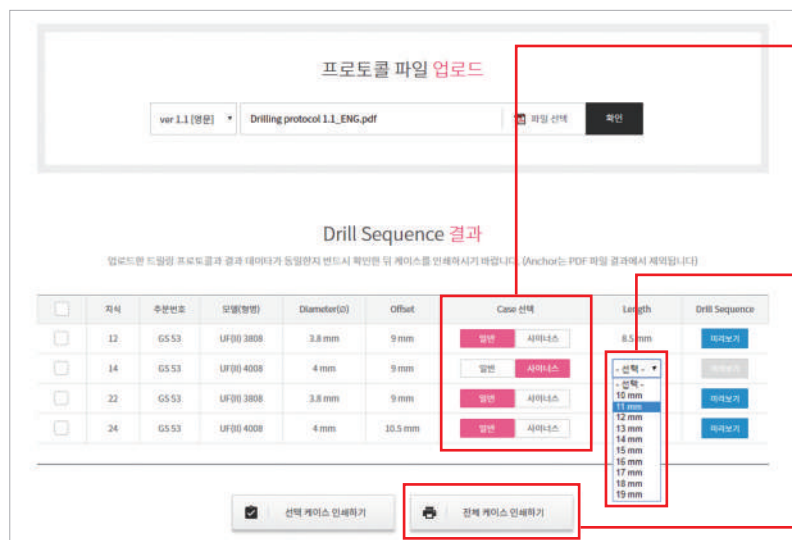


Case 선택
- 데이터 추출시, 일반Case로
선택되어 데이터 조회
- 사이너스 선택으로 Case를
변경하여 이미지 조회 가능

길이(Length) 선택
Sinus case의 경우, 화면에
표시되는 여러 정보를 조합
하여 이미지를 추출하기
때문에 해당 길이 또한 선택을
하여야 이미지 확인 가능


인쇄하기
특정 데이터를 선택하여
인쇄, 또는 전체 케이스에
대하여 모두 인쇄하는
기능 제공

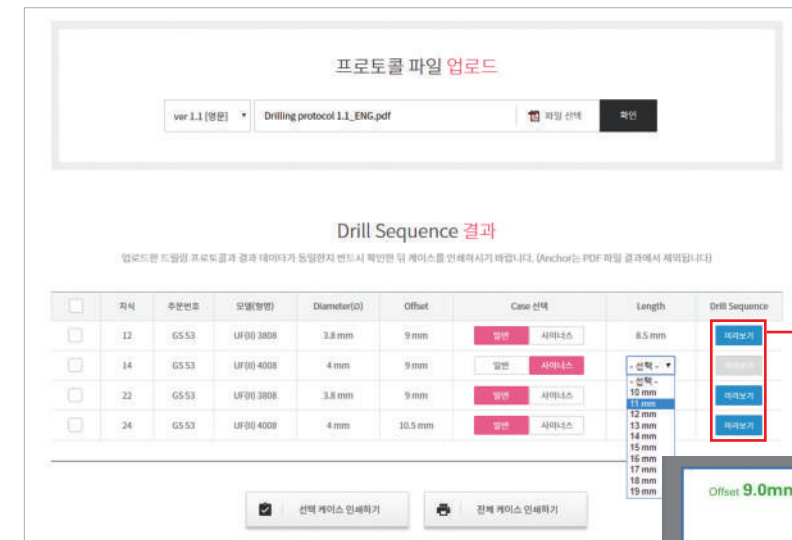

미리 보기 버튼 클릭
추출한 데이터를 이미지로
확인(데이터 시각화)

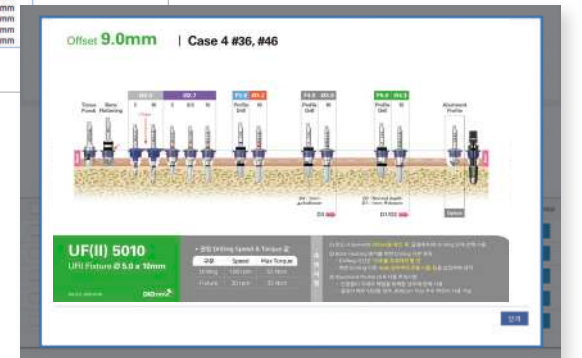

▶ 배송조회 확인 방법

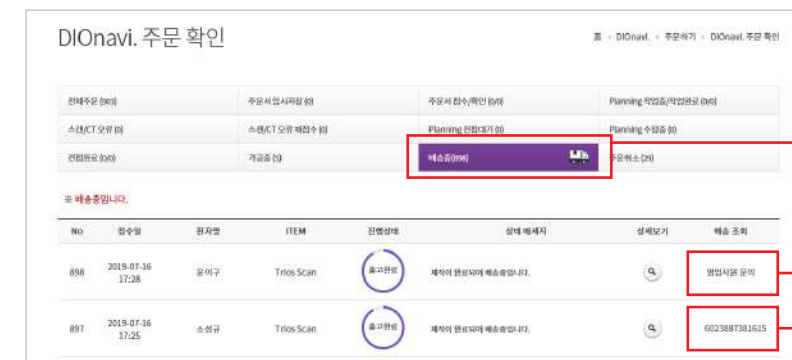

배송중
영업사원 문의 건은
담당 영업사원에게 확인 가능




**배송조회에서 송장 번호
클릭 시 배송 진행현황
확인 가능**

1 DIOnavi. Guide 안착 확인 방법 / 주의사항

① 구강 내 체결부에 대한 육안 확인


Guide에 개통되어 있는 Window 및 시술 부위 인접치와 가이드 간의 적합 확인

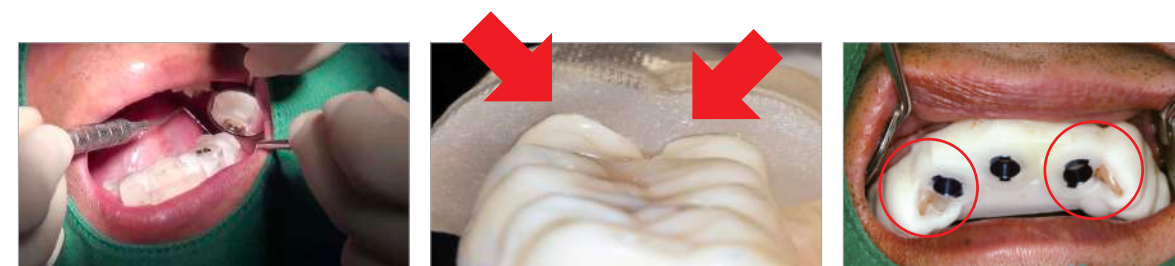

② CT 이미지 상 Sleeve 위치 및 방향 확인

CT 이미지 상의 Sleeve의 위치 및 방향이 Planning 한 것과 일치하는지 여부 확인

※ 시술 전, 가이드가 정 체결되었는지 여부에 대해 CT 이미지 확인을 권장합니다.

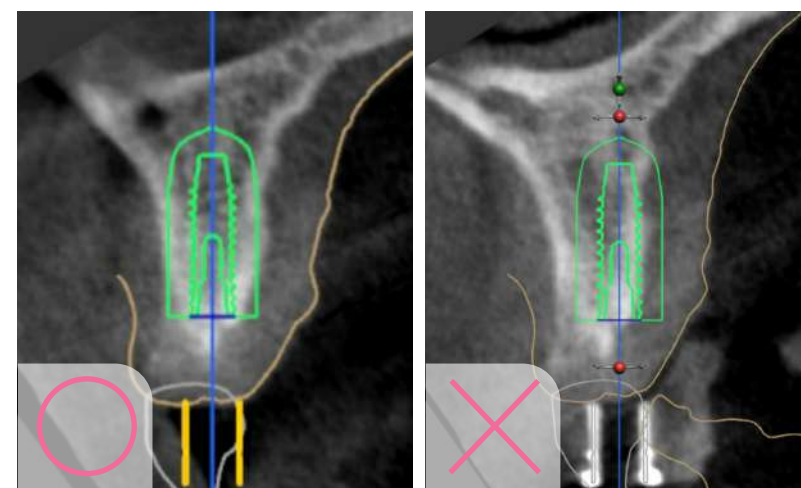

③ CT 이미지 상 Sleeve center 기준 사이즈 정보 확인


Sleeve center 기준 화면 구성



Surgical Process

2 DIONavi. Surgical Kit Line-up

① DIONavi. Kit 구성

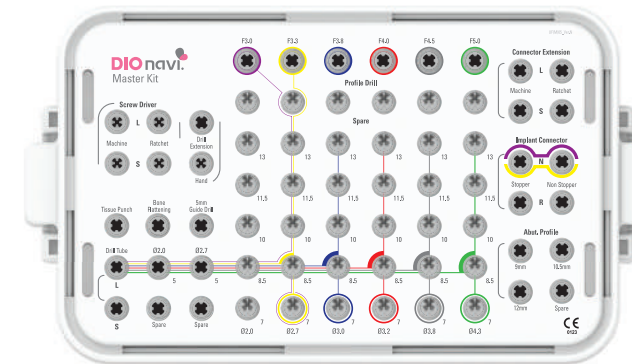

DIONavi. Master Kit




DIONavi. Narrow Kit




DIONavi. Wide Kit



DIONavi. Flapless Crestal Sinus Kit

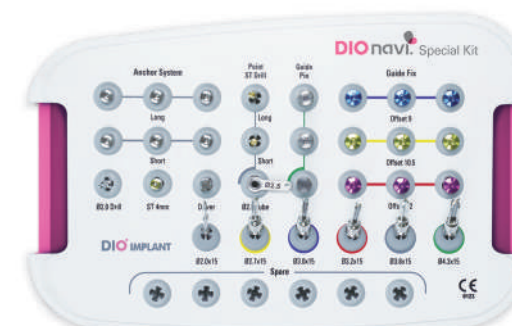

DIONavi. Special Kit

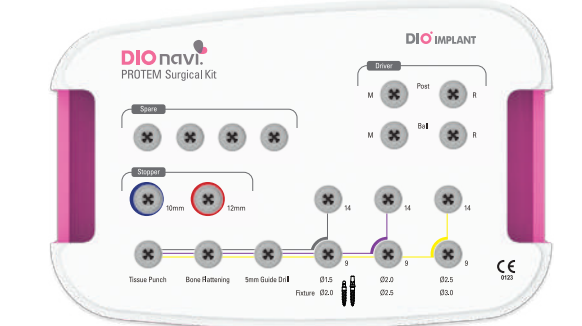


DIONavi. Protem Kit

DIO에서 제공하는 Drilling protocol 상의 Sleeve(내경 및 Offset) 및 Fixture 사이즈 정보 확인을 통해 계획된 사이즈와 CT상 사이즈 일치 여부 확인

Implant information	
Implant position (FDI)	12
Manufacturer	DIO
Type	UF(II)N 3313S
Order number	UF(II)N 3313S
Length, mm	13
Diameter (Ø), mm	3.3
Color	Yellow
Sleeve information	
Name	DIO GS 36
Type	Fully guided
Order number	GS 36
Offset, (mm)	12
Drill information	
Minimum drill length	25

A Fixture 사이즈 정보
Length 및 Diameter

B Sleeve 내경 및 Offset 사이즈 정보
- Sleeve 내경 사이즈
- Offset 사이즈 :
Sleeve top 부위부터 Bone 상단 면
까지의 사이즈 측정

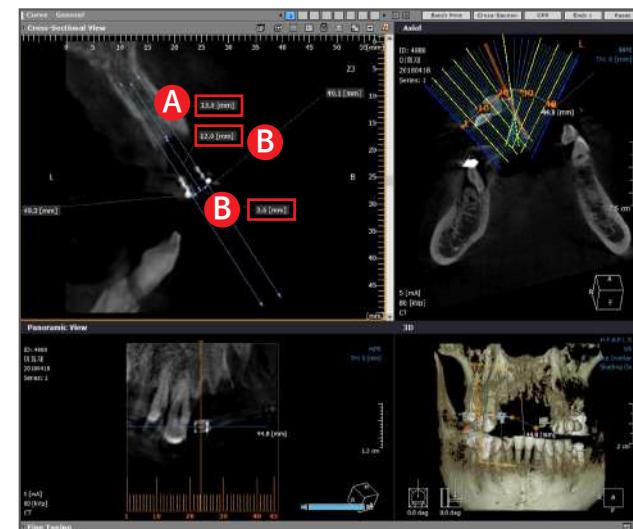

④ DIONavi. Guide 불완전 안착 시 조치 방법

Guide가 걸리는 부분이 있는 경우



TIP 교합지를 Guide의 Base 부분에 위치시킨 상태에서 장착, Marking 된 부분을 삭제하여 장착합니다.

TIP TRIOS 스캔 시 금속 보철물이 있거나 전치부의 경우 Arch가 돌아가는 부분에서 왜곡 현상이 가끔 생길 수 있으므로 시술과 관계없는 부위를 Cutting하고 체결합니다.

3 Surgical Kit 구성품

② 수술 Case 별 Surgical Kit


Sleeve size case 별 Regular | Narrow | Wide

Regular

DIONavi. Master Kit



[GS 53]

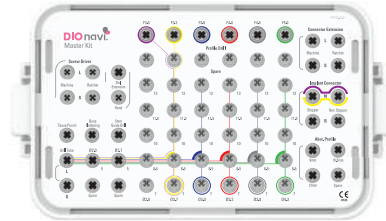

Narrow


DIONavi. Narrow Kit
DIONavi. Protem Kit



[GSL 36]




[GS 36]

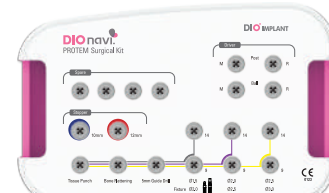

Wide

DIONavi. Wide Kit

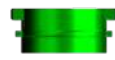


[GS 68GN]



Surgical case 별 Sinus | Edentulous



Sinus case

DIONavi. Master Kit &
DIONavi. Flapless crestal sinus Kit

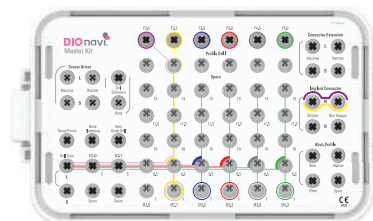


Edentulous


DIONavi. Master Kit &
DIONavi. Special Kit

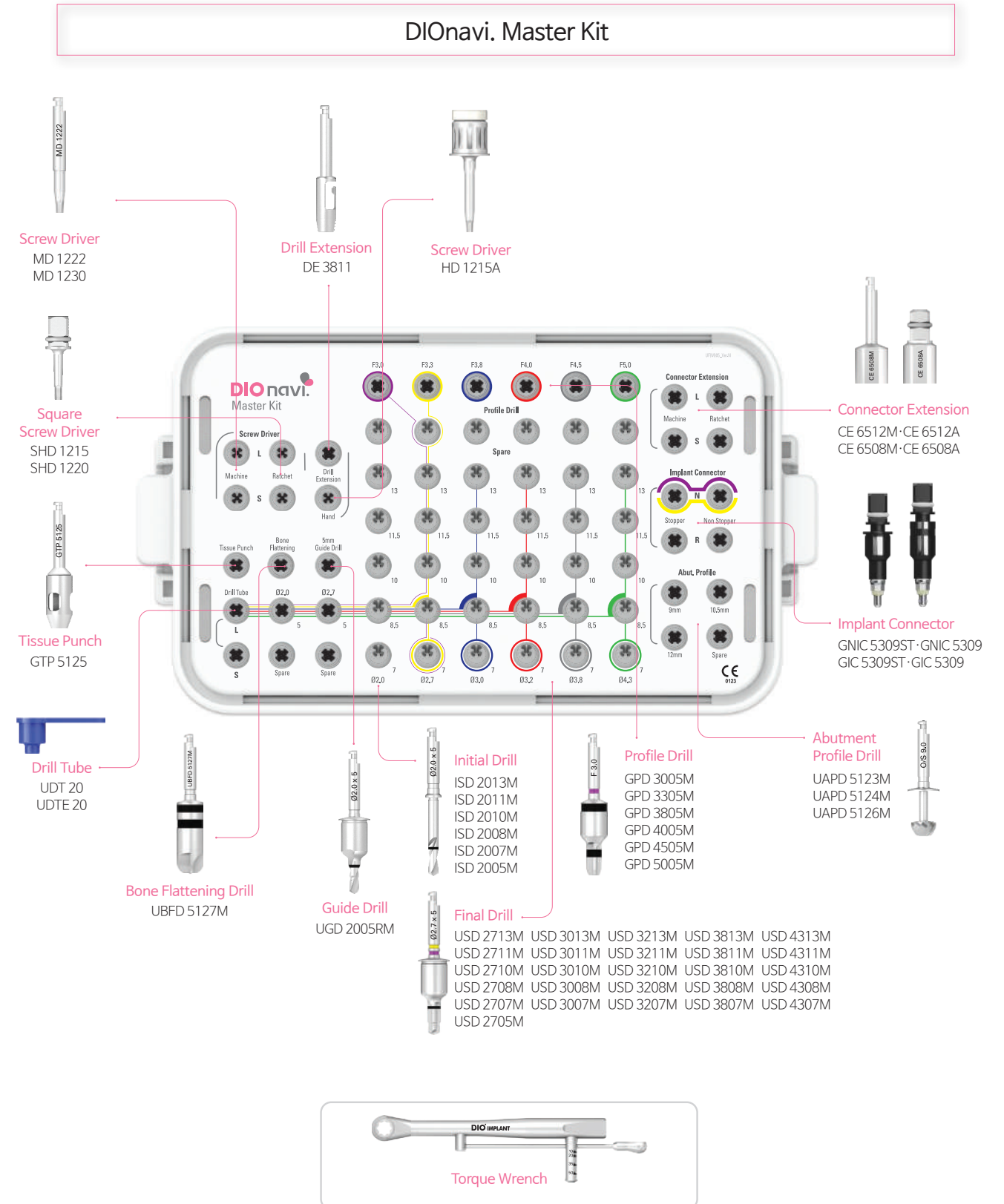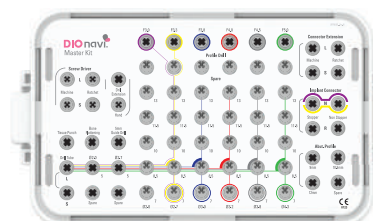


DIONavi. Narrow Kit

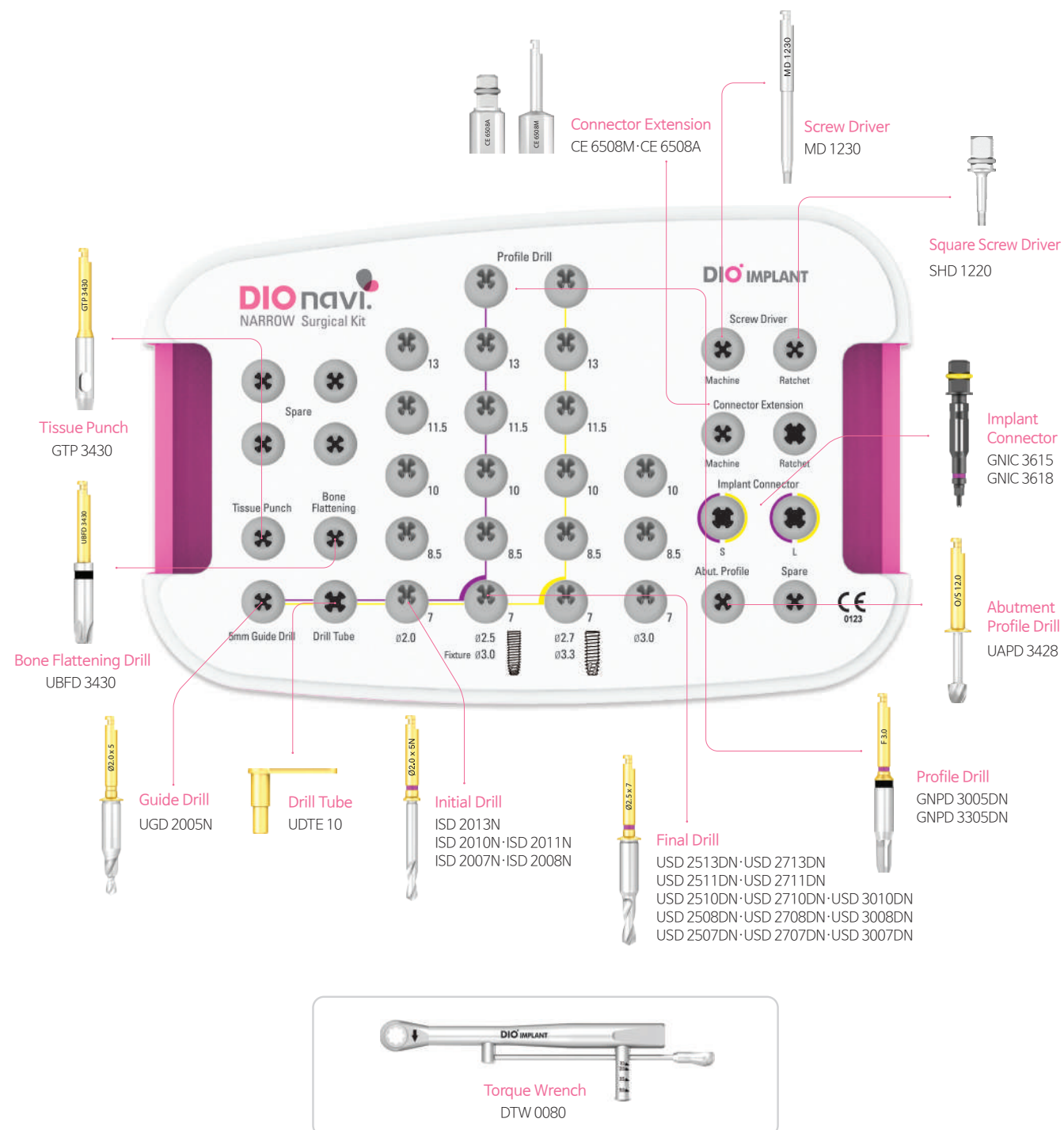

DIONavi. Protem Kit

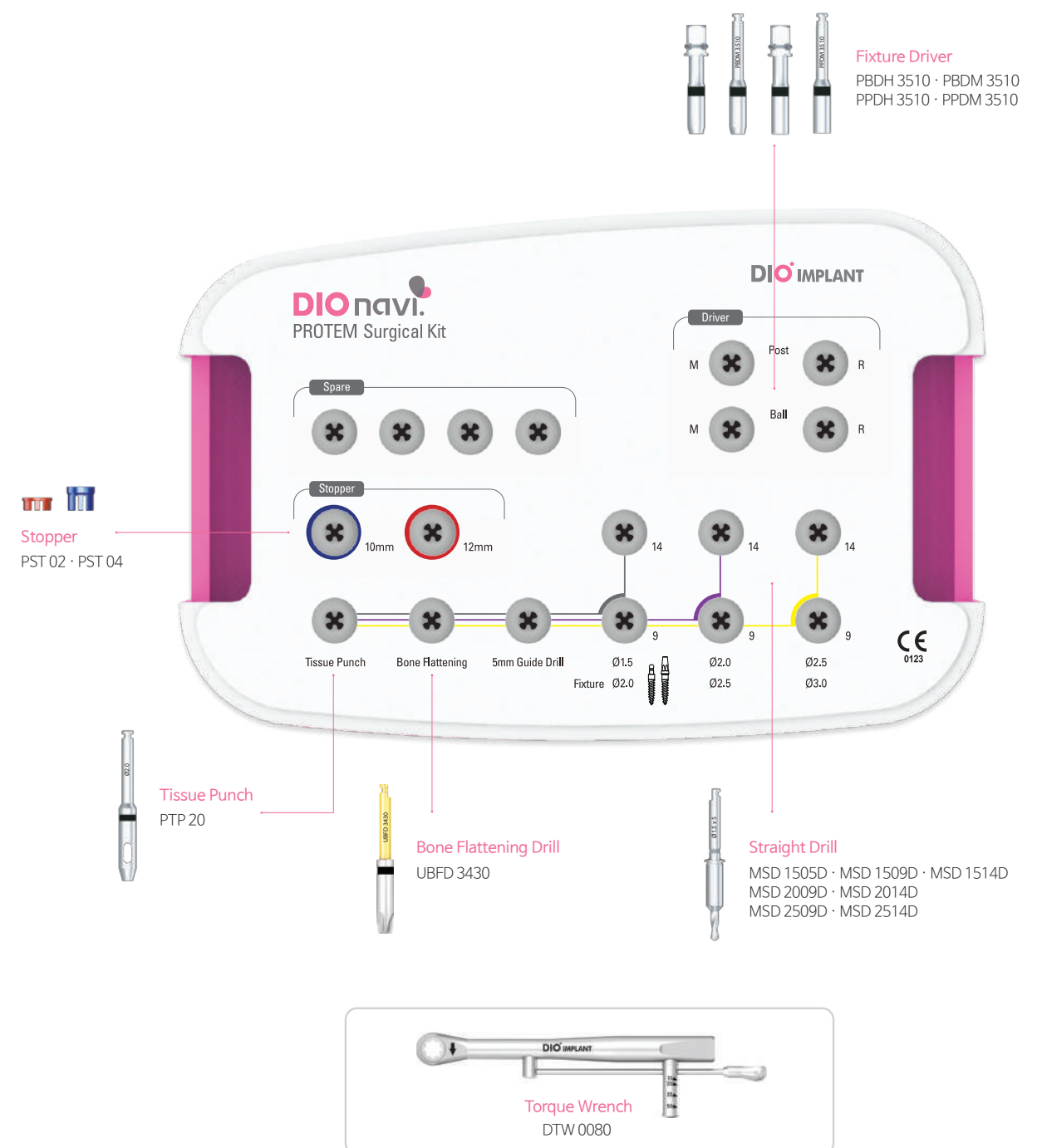

DIONavi. Wide Kit

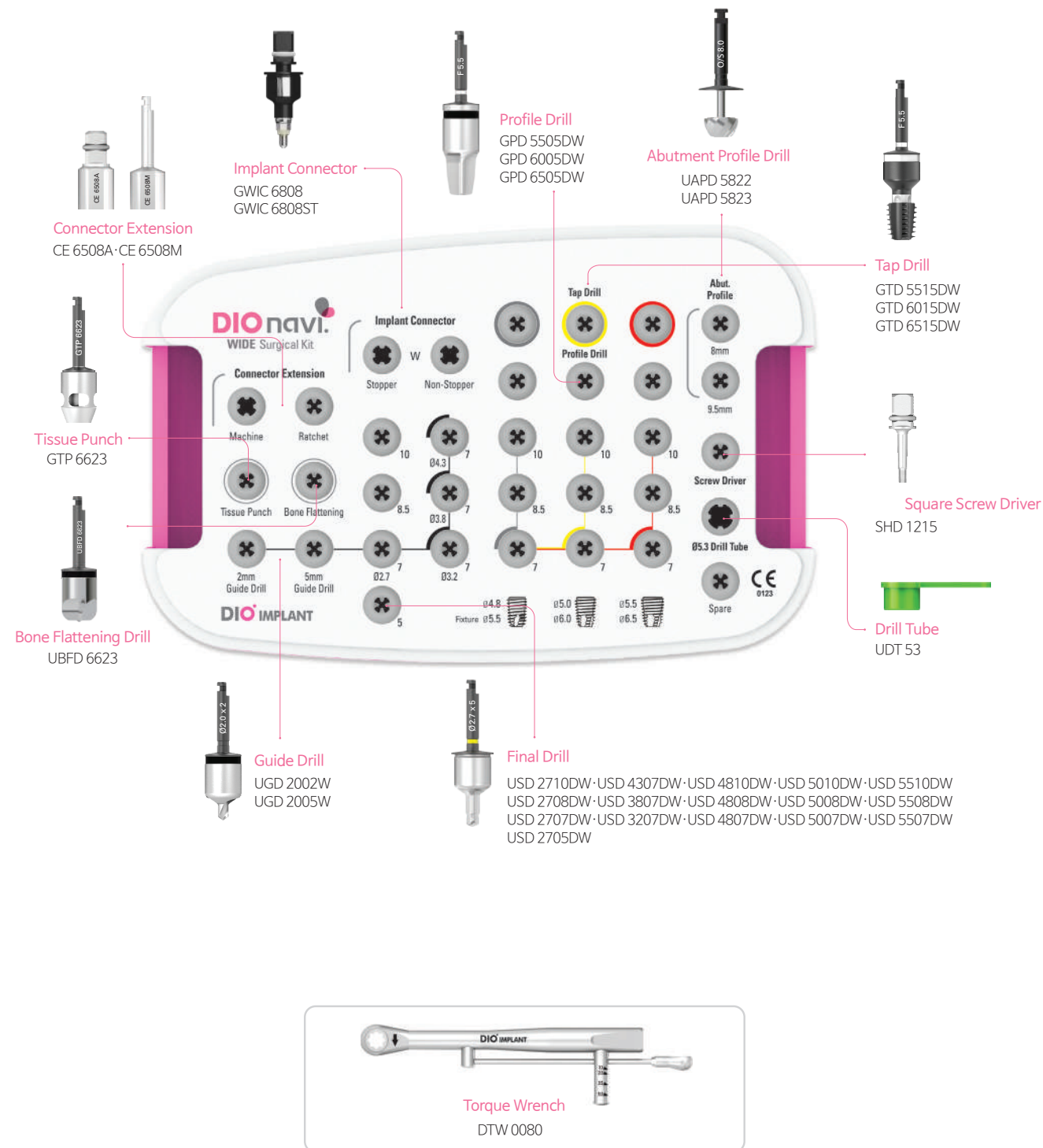


① Tissue punch

Implant를 식립할 위치의 치은을 절개하고 잇몸조직을 제거합니다.

* 권장 rpm : 100 rpm

• Implant 직경보다 작은 Tissue punch 효과

- 01 점막과 Abutment의 표면의 접촉으로 시술 후 지혈 효과
- 02 창상 치유가 빠르게 진행됨
- 03 작은 반흔을 남기면서 치유됨

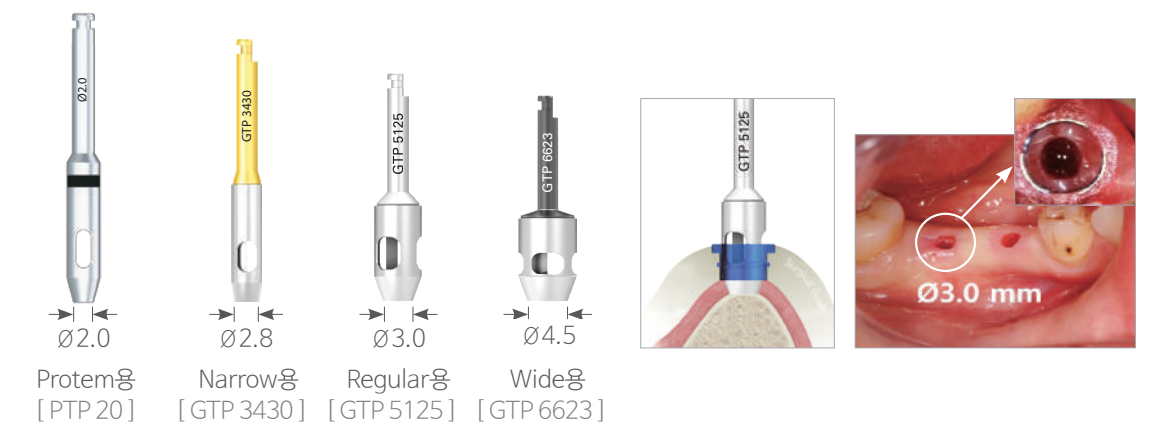

TIP 시술 후 잔여물이 남으면 녹이 발생되므로 청결하게 관리해야 합니다.
Explore나 Steam을 이용하시면 보다 쉽게 제거하실 수 있습니다.
잔여 치은은 Blade로 제거하시면 됩니다.


② Bone flattening drill

치조정 골면을 평평하게 만듭니다.

(골면이 평평하지 않으면 Drill이 미끄러져 의도하지 않은 방향으로 Drilling 됩니다)

Tissue punch 사용 후 치조정에 남아 있는 연조직을 제거합니다.

Cortical 층이 두꺼우면 주수하면서 100 rpm을 사용합니다.

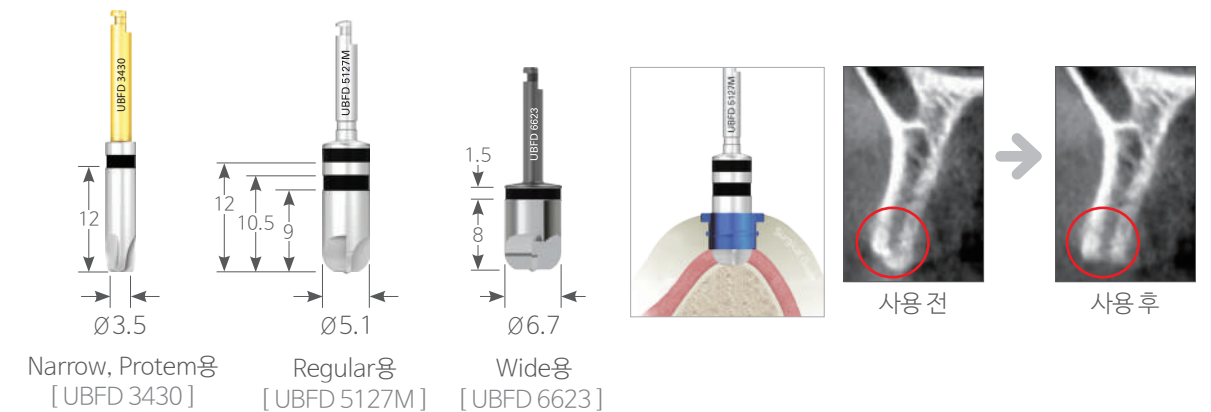


③ Ø2.0 Initial drill

초기 Drilling hole의 정확한 위치와 방향을 확보합니다.

Drill tube와 함께 5mm 길이로 Drilling 후 Fixture size에 맞는 Drill을 선택하여 사용합니다.

* Drill tube를 사용하여 Drill을 좀 더 안정적으로 고정시킴으로써 정확한 위치와 방향을 유지하면서 Drilling이 가능합니다.

* 권장 rpm : 주수없이 100 rpm

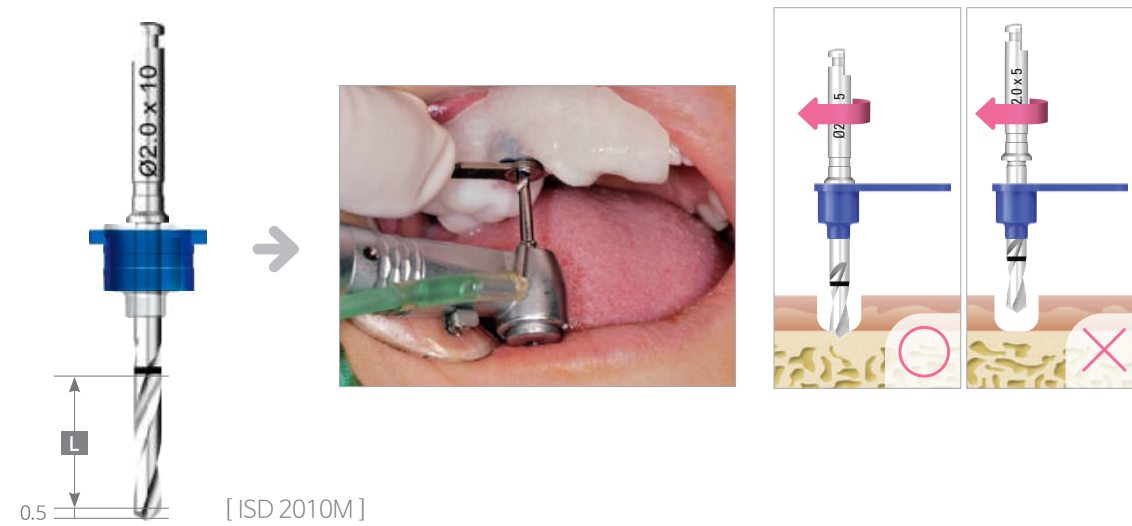


L Length = 5 / 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15mm ※별매품

주의 Drill이 Drill tube를 지나 Bone에 닿아 안정적으로 안착이 된 후 Drilling을 시작합니다.
미리 회전하며 진입할 경우 Drill이 Drill tube에 끼일 수 있습니다.

▶ Ø2.0 Drill tube

Sleeve offset, Drill 길이에 따라 선택 사용하며 고정면적이 클수록 Drilling은 안정적일 수 있습니다.


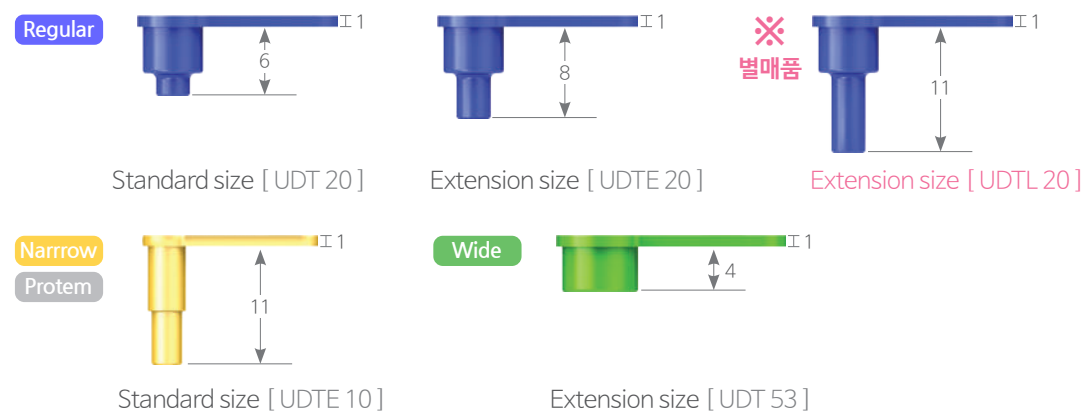


▶ Drill tube의 필요성

골 폭이 좁은 경우와 가이드 수술 전에 미리 제작된 Abutment를 장착하기 위해서는



오차 각도가 3° 이내로 요구됩니다. (Digital Flapless Implantology, 최병호, 2015)

시술 오차 3도 이상이 위험한 이유?

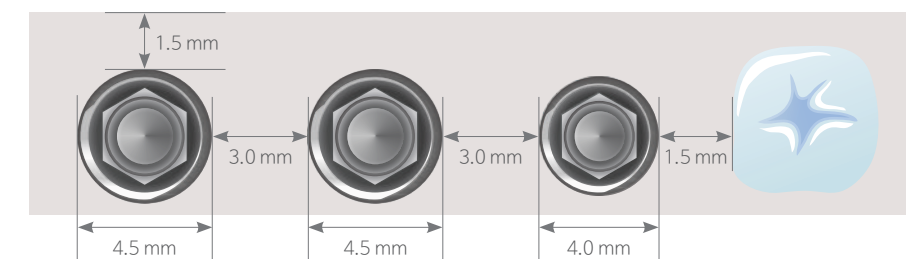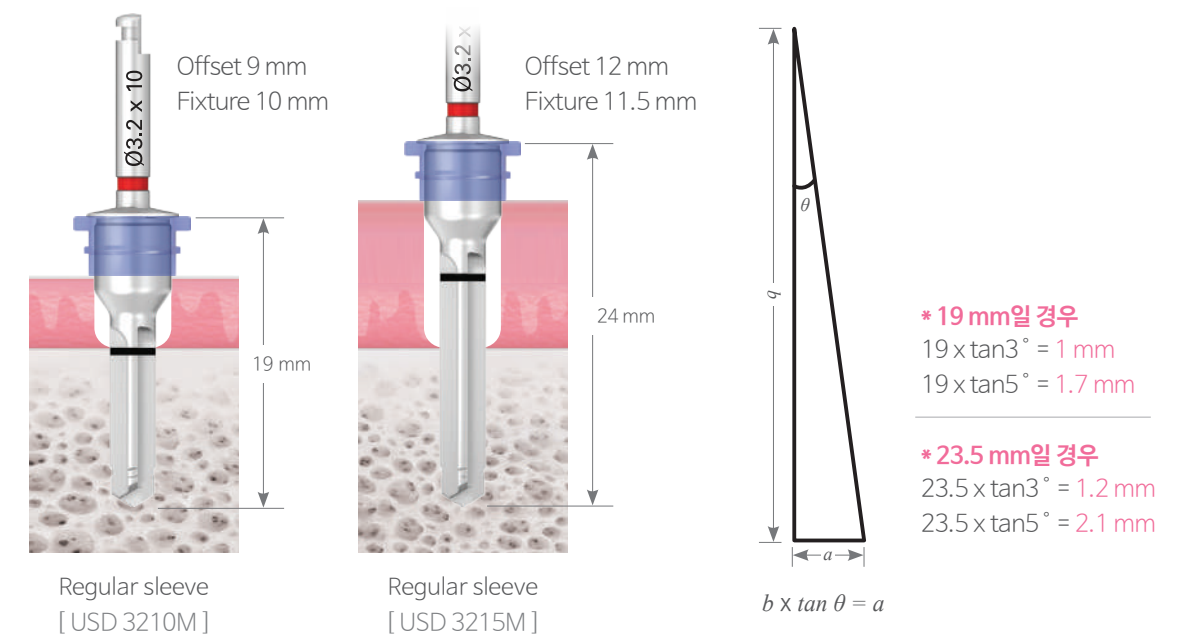

▶ Drill tube를 사용 시 정밀도 확보 용이

Initial drill의 정확성이 시술의 정밀도를 좌우합니다.

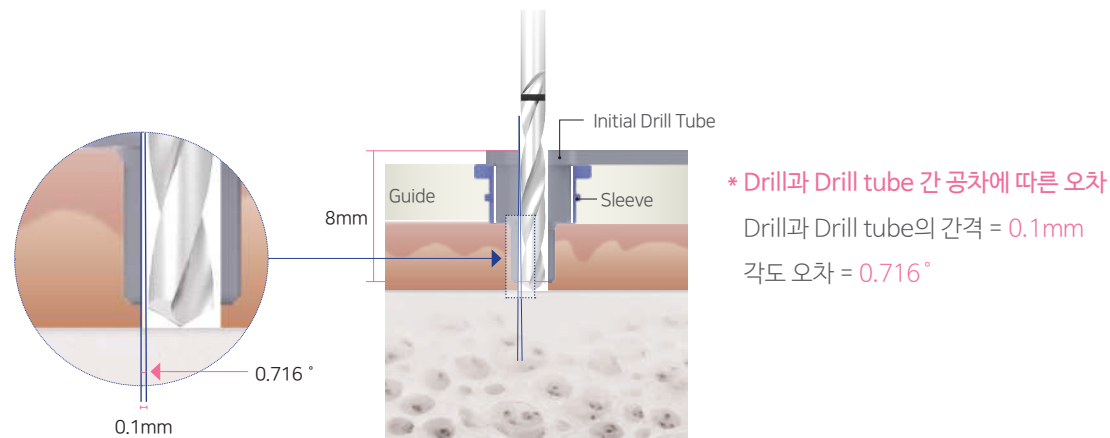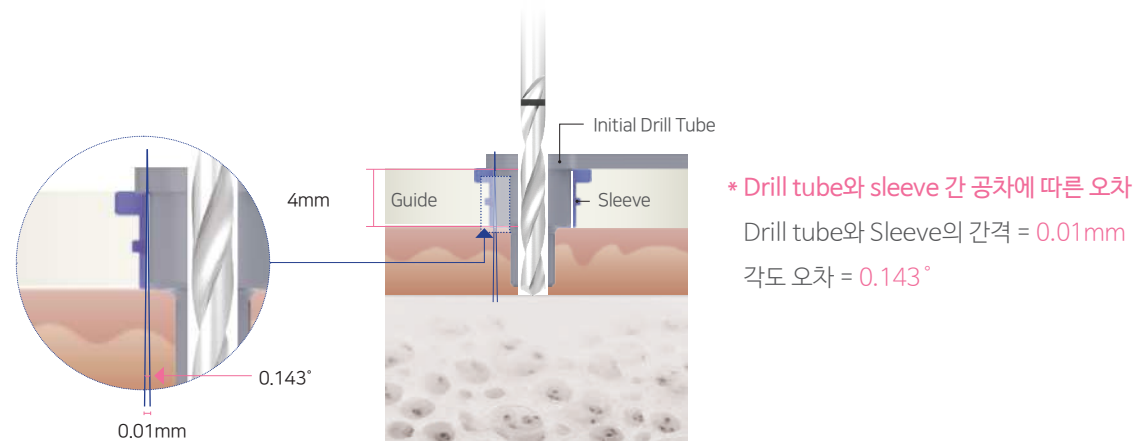

Max ① + ② ➔ $0.143 + 0.716 = 0.859^\circ$




④ Ø2.0 Guide drill

개구량이 작을 경우에 Drill tube 없이 사용하는 Initial drill 5mm Drilling만 가능
(Wide의 경우 2mm, 5mm 2가지 사양)



* 개구량이 작을 경우에만 사용

* 권장 rpm : 100 rpm

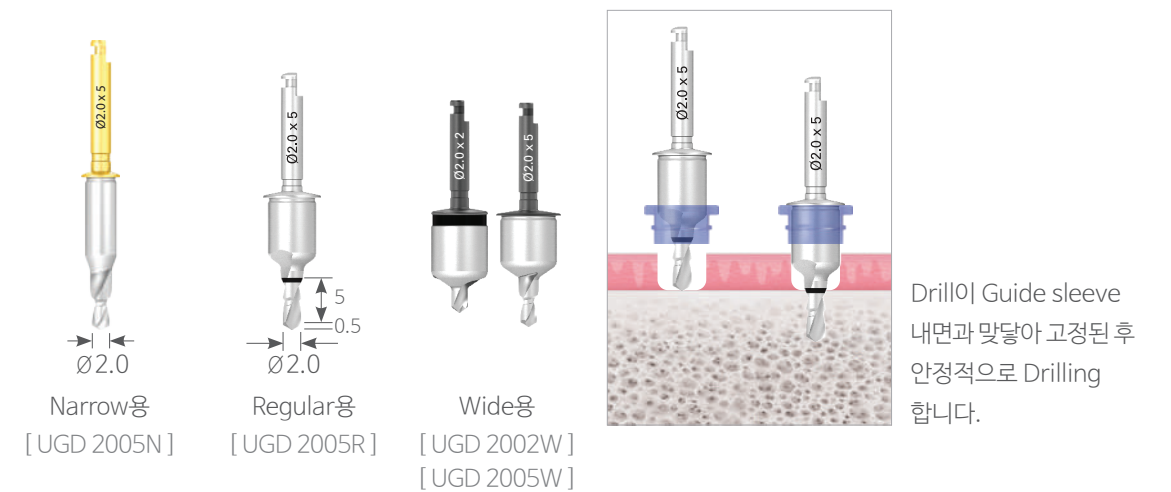

▶ Drilling 이후 주수


Metal needle을 활용하여 골와동 깊이까지 위치시켜 사용해야 Bone heating 방지 및 골와동 내 Particle을 깨끗이 제거할 수 있습니다.

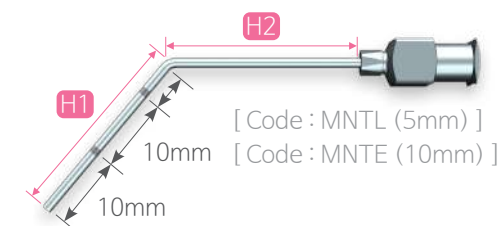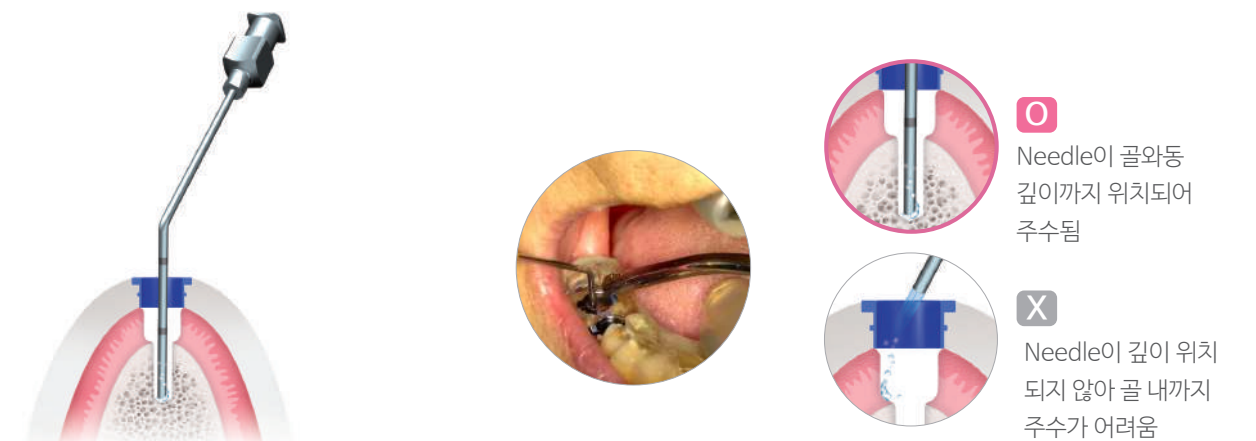

Code	H1	H2
MNTE	30	50
MNTL	25	25

* 권장 Syringe 규격
30~50cc (시술 전 냉장 보관)

▶ Drill 단계의 권장사항

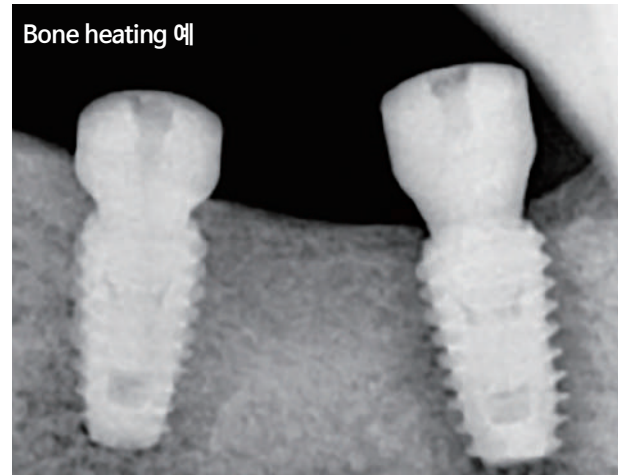

* 각 Drill 단계마다 Drilling hole 세척 및 Suction의 반복 수행 권장

100 rpm 이하의 저속 Drilling 시에는 무주수를 원칙이지만 Bone heating 방지 및 골와동 내 Particle의 제거를 위하여 각 Drill 단계마다 골와동까지 Drilling hole 세척 및 Suction의 반복 수행을 권장합니다.

TIP Drilling 10초 Rule!

골밀도가 높은 케이스에서 저속으로 Drilling 할 경우, Drilling 시간이 길어지면 Bone heating의 위험이 있기 때문에 Drilling 시간은 10초를 넘기지 않아야 합니다.
만약 시간이 길어지게 된다면 10초 이내로 Drilling하고 Drill을 제거 후 골와동까지 주수한 후 재 Drilling 합니다.

⑤ Final drill

Drill tube 없이 Drill body와 Guide sleeve가 맞닿아 고정되며 Fixture size에 맞게 Drill을 선택하여 Drilling 합니다.

* 15mm Drill은 별도 구매 또는 DIONAVI. Special Kit에 기본 구성되어 있음

* 권장 rpm : 100 rpm




주의 Drill body와 Sleeve, Drilling hole 안착으로 Double contact 되므로 짧은 길이의 Drill로부터 사용해야 미끄러짐 등을 방지할 수 있습니다.

⑥ Profile drill

D1 또는 D2의 하악골에서 Cortical bone을 확장하여 Fixture 식립 시 과도한 Torque를 방지합니다.
또한, 골 평탄화와 안정적인 Drill 진입에 도움이 됩니다.

* 권장 rpm : 100 rpm

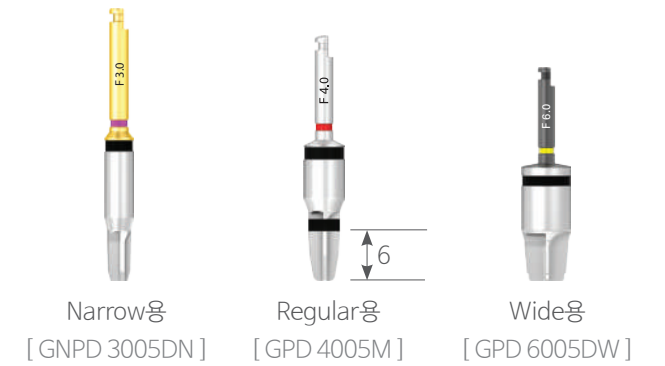

⑦ Tap drill

Fixture 식립 시 과도한 Torque를 방지합니다.


* 권장 rpm : 50 rpm




⑧ Abutment profile drill

Abutment 또는 H-Scanbody를 체결 시 간섭이 되는 치조골을 제거합니다.
Drill을 Sleeve의 내면을 타고 회전시켜 Abutment profile을 형성합니다.

* 권장 rpm : 800 rpm

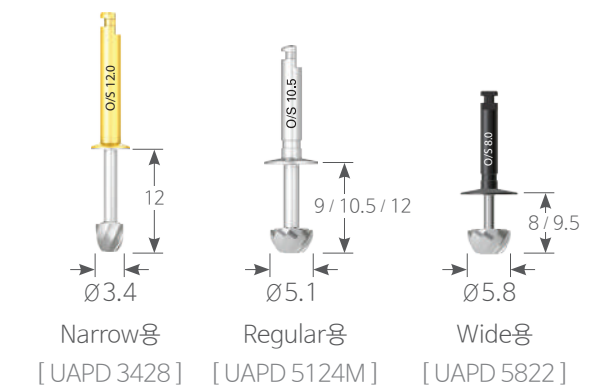


* Abutment profile drill

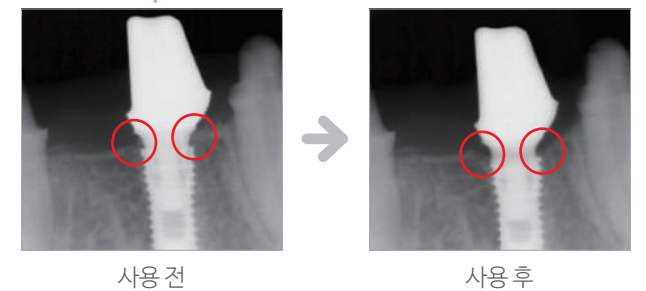

* Bone profile drill (별매품)


2차 수술 시 Cover screw 제거 후 Fixture 인접 Bone을 제거하여 Abutment(Healing) 체결이 원활하게 됩니다.

* 권장 rpm : 100 rpm


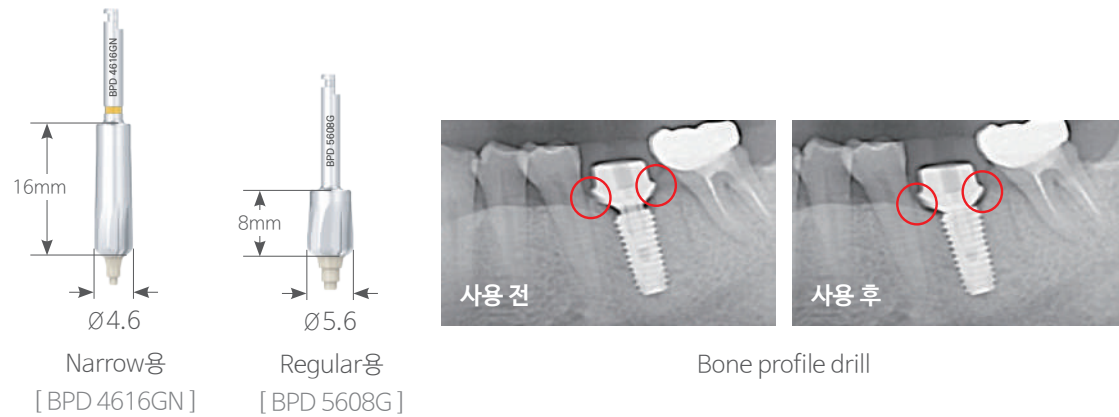


⑨ Implant connector


Fixture를 Guide sleeve까지 안정적으로 견인하여 식립합니다.
Sleeve offset과 Implant connector의 깊이를 일치시킵니다.

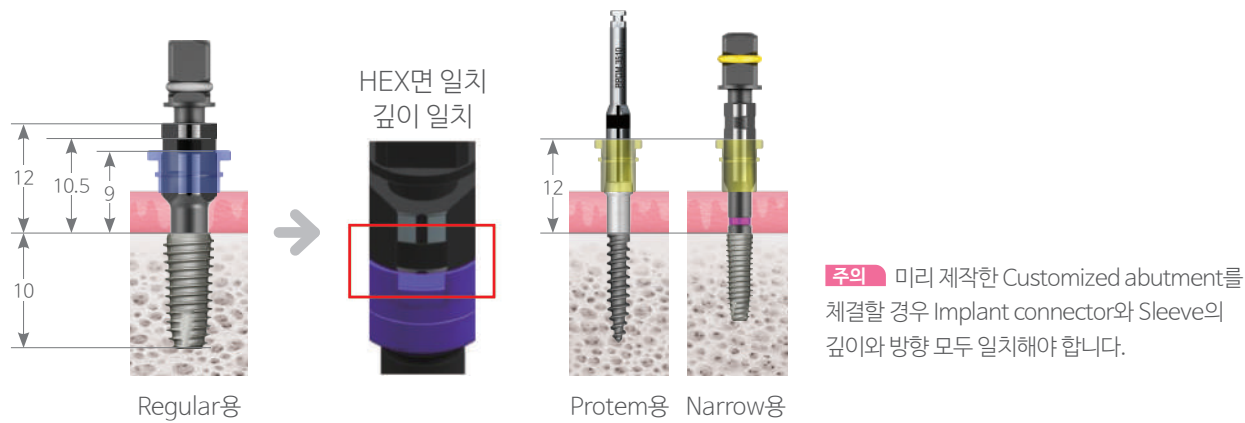

K UFII Regular

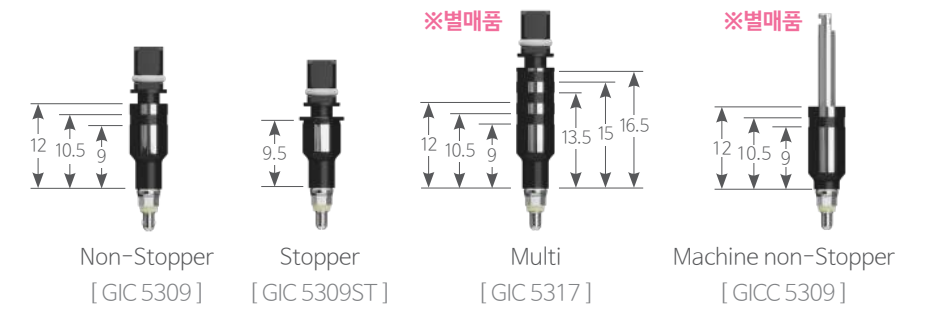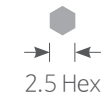

K UFII Narrow

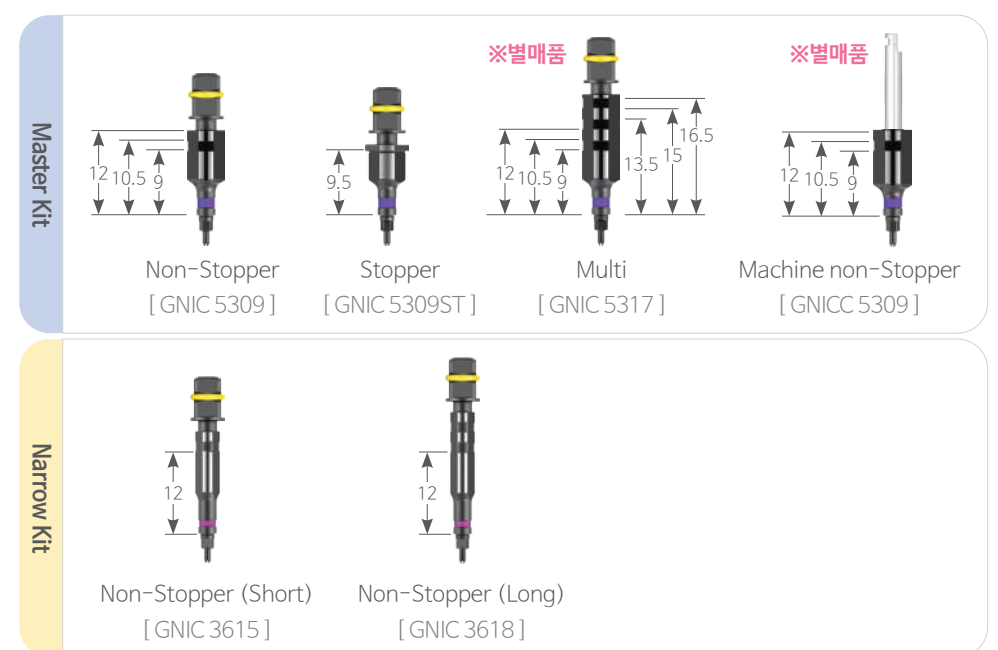

K UFII Wide




⑩ Connector extension

Implant connector를 연장하여 Ratchet, 핸드피스로 Fixture를 식립합니다.



⑪ Drill extension

Drill을 연장하여 핸드피스로 Drilling 합니다.

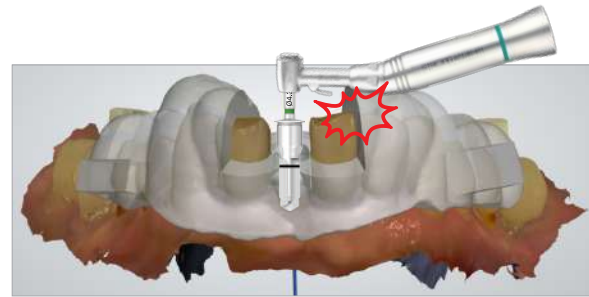

주의 핸드피스가 인접치아에 걸릴 경우, Drill extension 사용 또는 인접치 삭제가 필요할 수 있습니다.

⑫ Torque wrench


Implant connector를 이용한 Fixture 식립 시 사용합니다.



Offset의 이해


▶ Sleeve offset과 제품사용

① Regular 사양

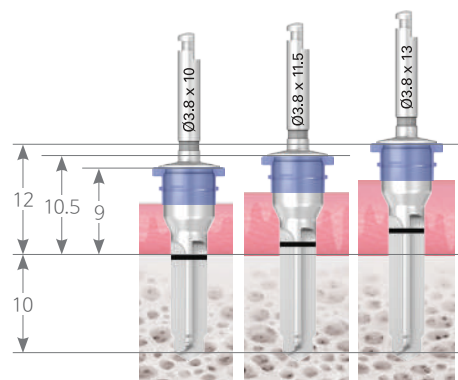

Sleeve offset에 따른 Drill 선택 방법
(10mm Drill 기준)

Offset 9mm 경우	→	Drill 10mm
Offset 10.5mm 경우	→	Drill 11.5mm
Offset 12mm 경우	→	Drill 13mm

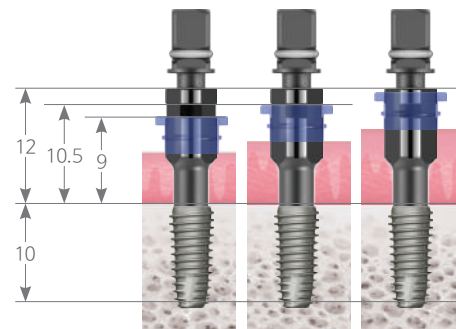

Sleeve offset에 따른 Implant connector 기준높이
(10mm Fixture 기준)


Offset 9mm 경우	→	첫 번째 눈금까지
Offset 10.5mm 경우	→	두 번째 눈금까지
Offset 12mm 경우	→	세 번째 눈금까지

주의 미리 제작한 Customized abutment를 체결할 경우 Implant connector와 Sleeve의 깊이와 방향 모두 일치해야 합니다.

② Narrow 사양




③ Wide 사양

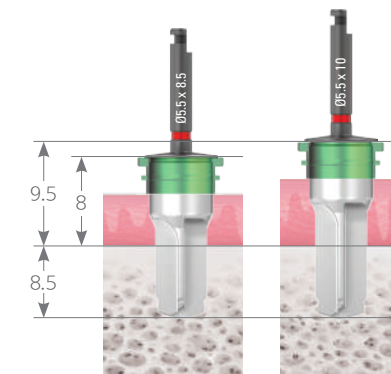

Sleeve offset에 따른 Drill 선택 방법
(8.5mm Drill 기준)


Offset 8mm 경우	→	Drill 8.5mm
Offset 9.5mm 경우	→	Drill 10mm

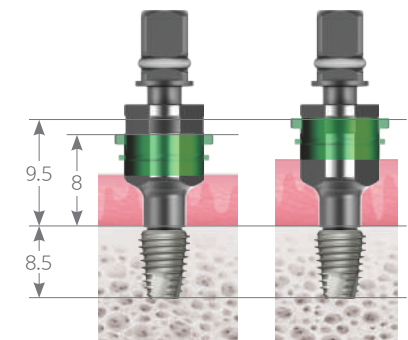


Sleeve offset에 따른 Implant connector 기준높이
(8.5mm Fixture 기준)

Offset 8mm 경우	→	첫 번째 눈금까지
Offset 9.5mm 경우	→	두 번째 눈금까지



▶ Sleeve offset 적용 시

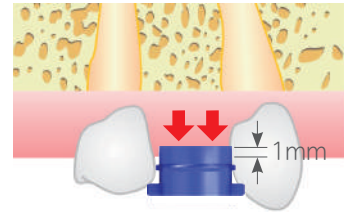



1mm 치은 안쪽으로 배치 가능

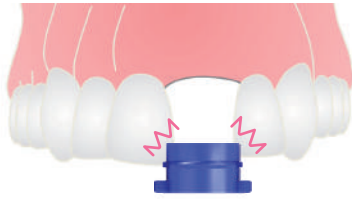

- Guide 체결 시 인접치아와의 간격이 좁아 Sleeve 진입에 간섭이 생길 때 인접치아를 삭제
- 잇몸이 두꺼운 경우 Sleeve를 1mm 정도 잇몸에 들어가도록 Planning 가능

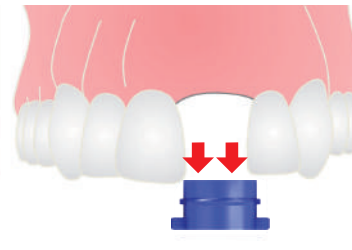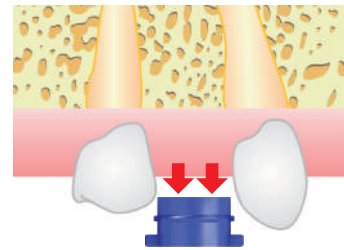

Sleeve를 1.5mm / 3mm 들어 올림

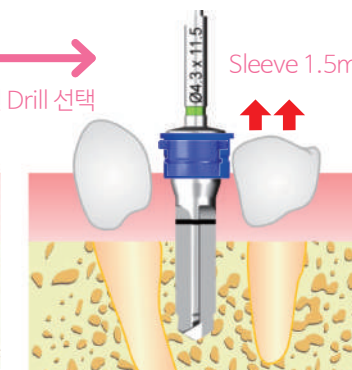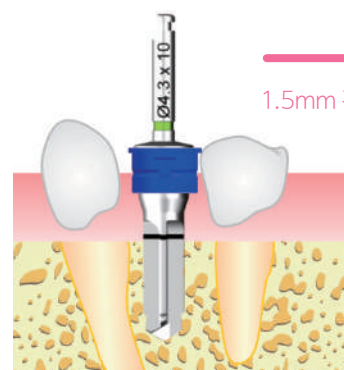


1.5mm 긴 Drill 선택

Sleeve 1.5mm 거상


10mm Implant 식립 시
Sleeve offset 이 10.5일 때
11.5mm Drill 선택

DIONavi. Flapless Crestal Sinus Kit

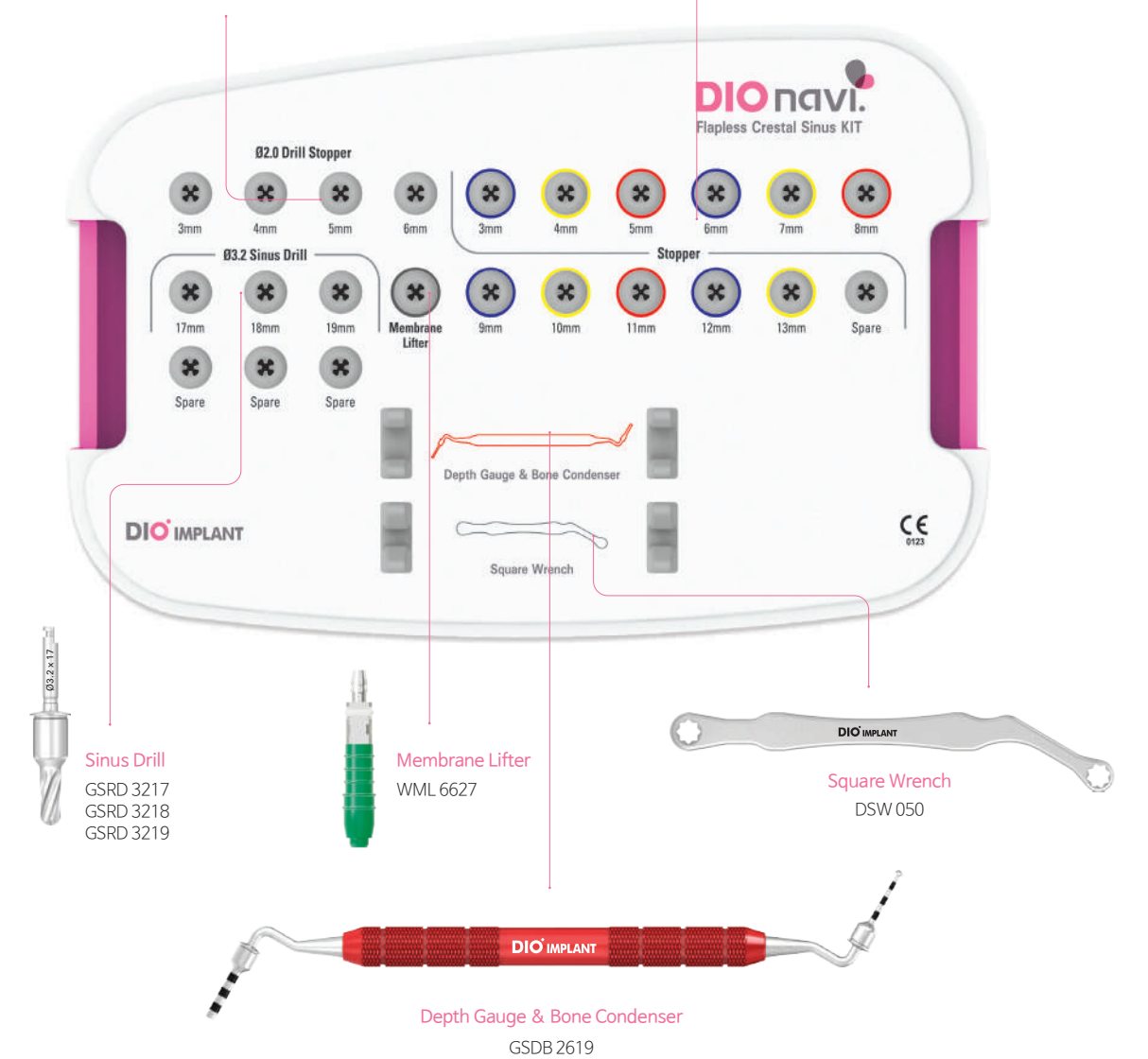

① Ø2.0 Drill 전용 Stopper


Ø2.0 Initial drill (DIONavi. Master Kit)에 체결하여 원하는 깊이만큼 안정적으로 Drilling 합니다.

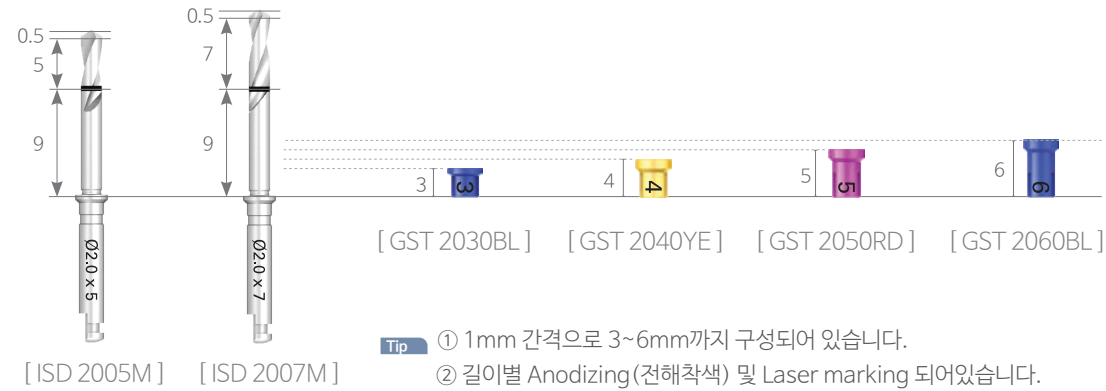

② Sinus drill (Crestal용) & Stopper


Round 형상의 앞날은 Membrane을 손상시키지 않고 Sinus에 근접해 Drilling 합니다.

* 무주수 저속 Drilling(10 rpm)

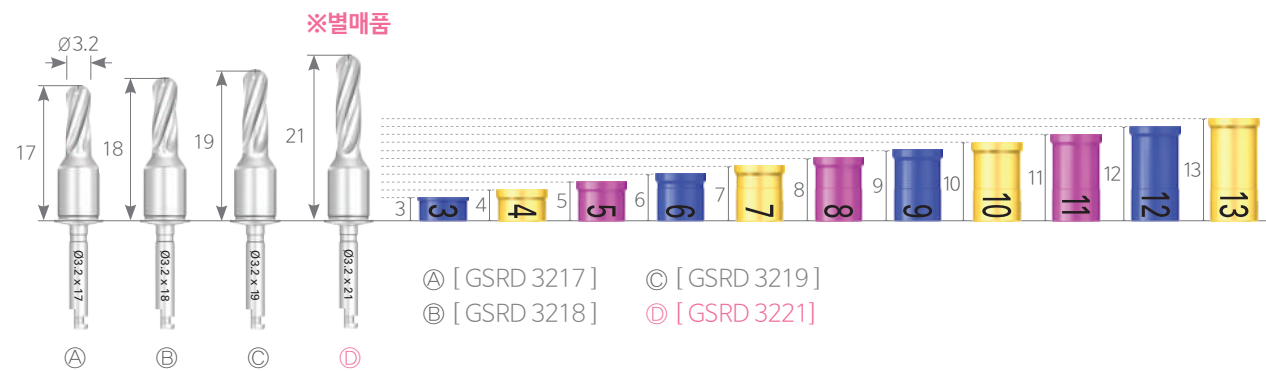

③ Depth gauge & Bone condenser

잔존골의 두께와 Membrane의 거상 여부를 확인하고 거상된 Sinus 안으로 Bone을 밀어 넣습니다.

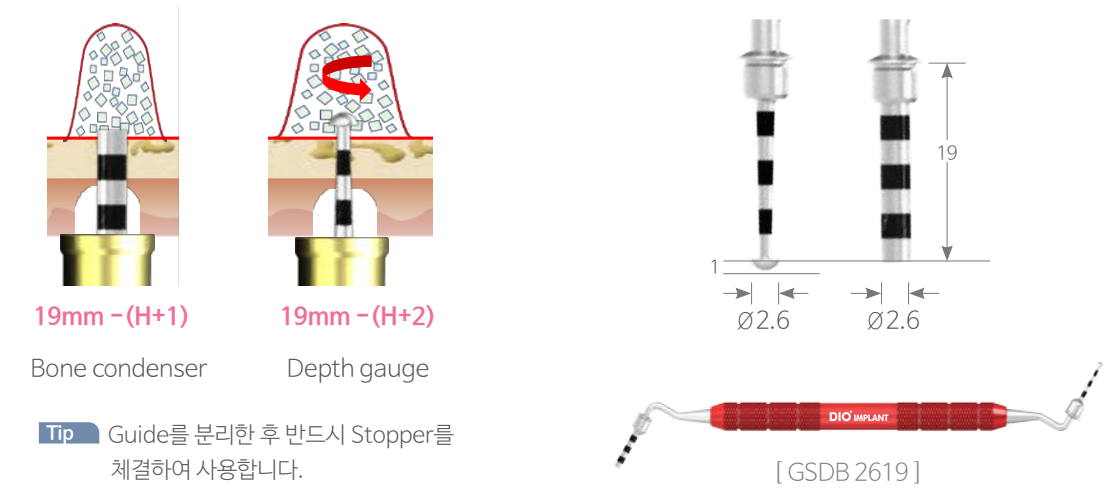

④ Membrane lifter

식염수를 이용한 수압방식으로 Single case에서 일반적으로 0.6cc를 천천히 주입합니다.




- Tip ① 상악동 막 염증 환자는 사용을 금지합니다.
② Sinus floor의 Morphology가 복잡한 형상(Septum 등)에서는 사용을 금지합니다.
③ 식염수 또는 환자 혈액을 사용합니다.
④ Guide 체결한 상태에서 사용합니다.

주의 수술 전 고온멸균(Autoclave) 후 사용하며 Lift tube는 교차 감염이 발생할 수 있으므로 1회 사용 바랍니다.

⑤ Square wrench

Membrane lifter를 Drilling hole에 안착 및 고정시킵니다.

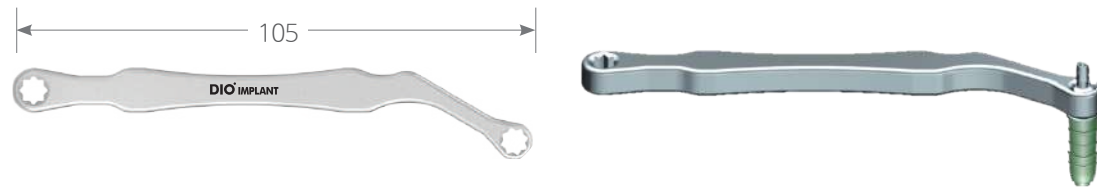

⑥ Syringe & Tube

Syringe ※별매품

5ml / cc 용량의 0.2ml / cc 눈금이 선명한 무침 주사기여야 합니다.

* 일회용 멸균 의료기기

Membrane lifter

Tube ※별매품

[MLT 40300]


반투명 실리콘 재질로 외경 Ø4.0 / 내경 Ø2.0 길이 300mm의 Tube입니다.

- Tip**
- ① 멸균지로 1차 포장 후 사용자 설명서를 동봉하여 2차 포장
 - ② 고객은 2차 포장재 개봉 후
 - ③ 1차(멸균지) 포장 상태로 Autoclave 실시하여 사용

주의 교차 감염이 발생될 수 있으므로
1회 사용 바랍니다.


⑦ Drilling protocol

ex) Ø4.5 x 10mm Offset 9mm

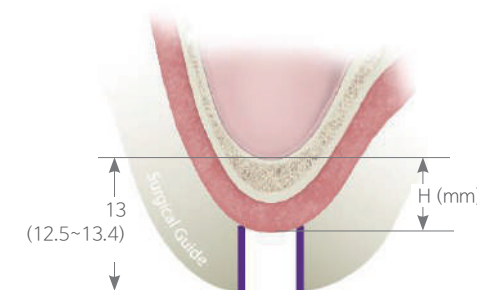

* 권장 Drilling speed & Torque 값

구분	Speed	Max torque
Drilling	100 rpm	55 Ncm
Sinus drill	10 rpm	35 Ncm
Fixture	30 rpm	35 Ncm

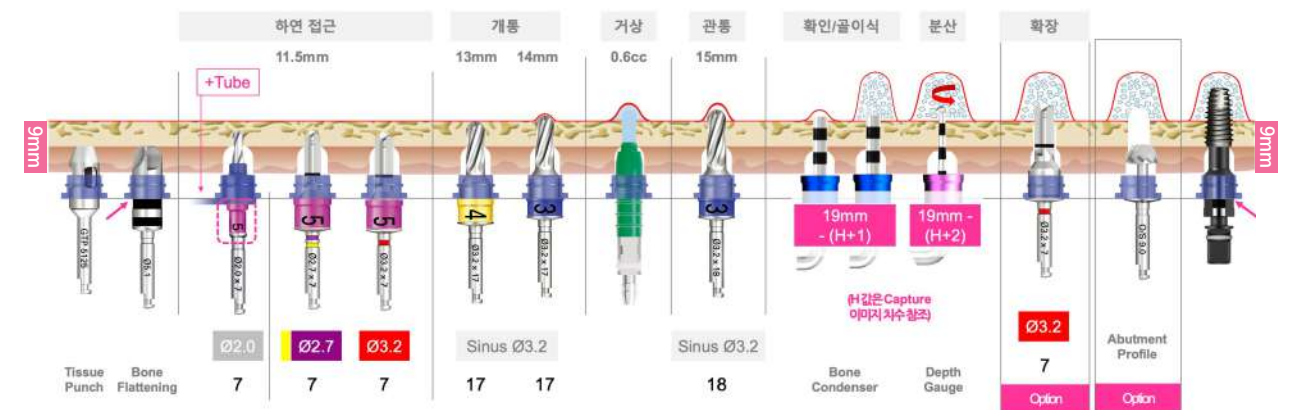


Stopper	5mm	5mm	5mm	4mm	3mm		3mm	H+1	H+2	-	-
Drill length	7mm	7mm	7mm	17mm	17mm	수압 거상	18mm	19mm - (H+1)	19mm - (H+2)	7mm	-
Ref	Ø2.0 Initial drill	Ø2.7 Straight drill	Ø3.2 Straight drill	Ø3.2 Sinus drill	Ø3.2 Sinus drill		Ø3.2 Sinus drill	Bone condenser	Depth gauge	Ø3.2 Straight drill	Abutment profile drill

Guide 분리 후

주의 Abutment profile drill은 잔존골 6mm 이상일 경우 사용하시기 바랍니다.
Sinus case에서 Ø4.5 이상의 Fixture 식립을 권장합니다


DIONavi. Special Kit

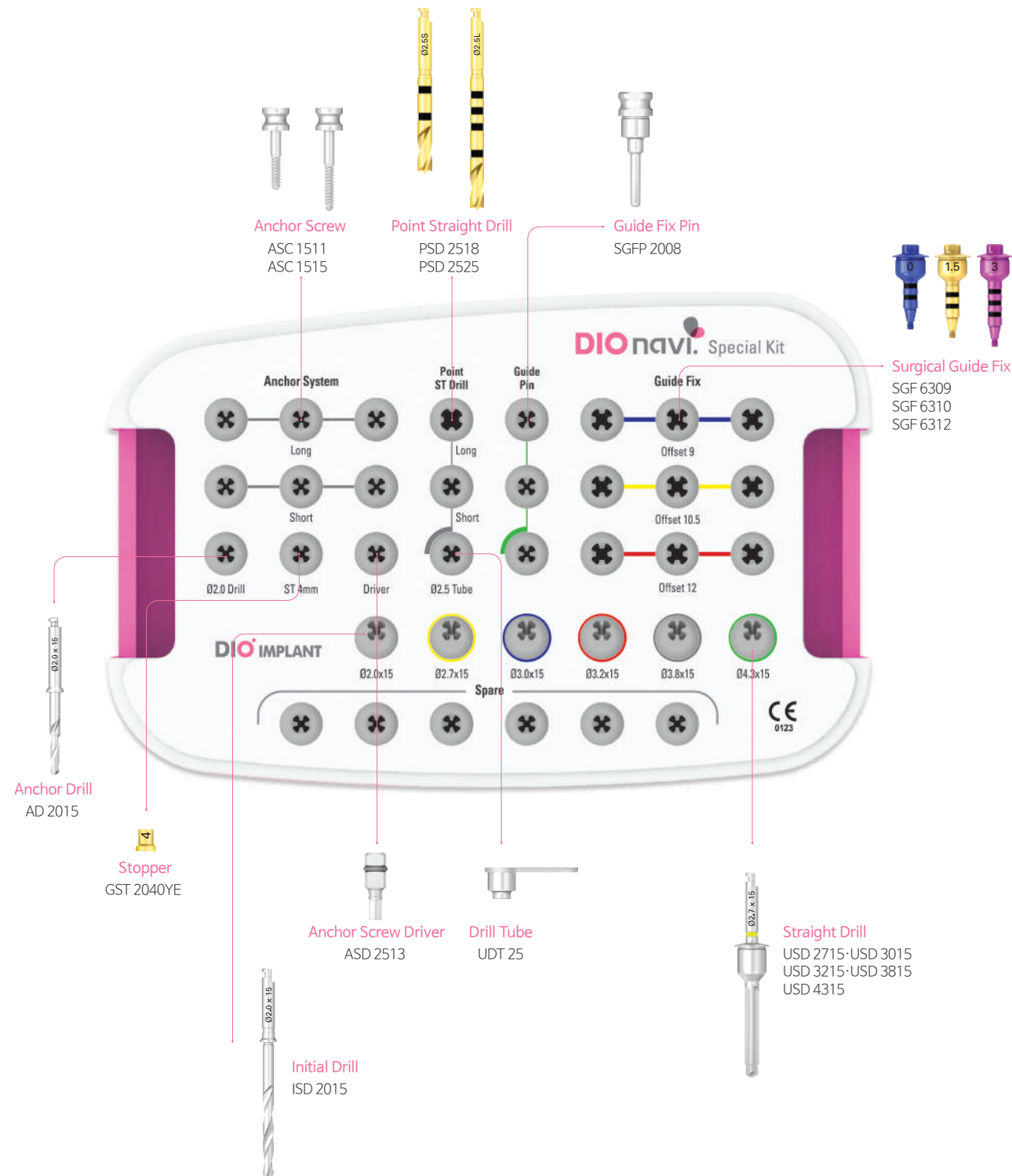

① Surgical guide fix & Fix pin

Drilling hole 또는 먼저 식립된 Fixture에 체결하여 Surgical guide가 움직이지 않도록 고정합니다.

* Fix(Fixture + Surgical guide)

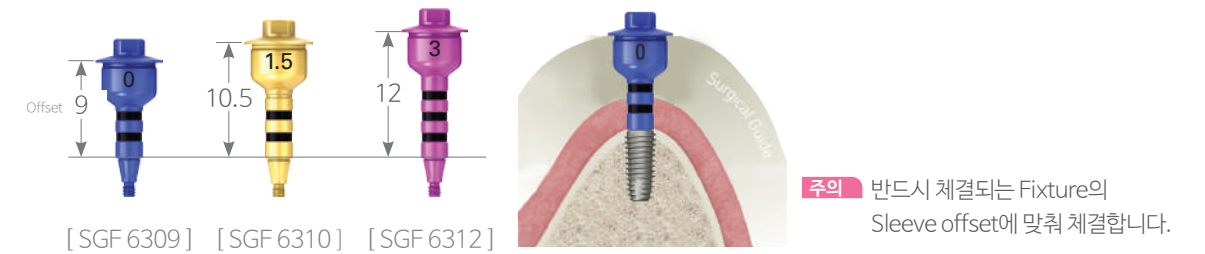


* Fix pin(Ø2.0 Drill hole + Surgical guide)



② Initial drill & Straight drill


Offset 12mm 이상, 13mm Fixture 식립 시 사용합니다.

* 권장 : 100 rpm

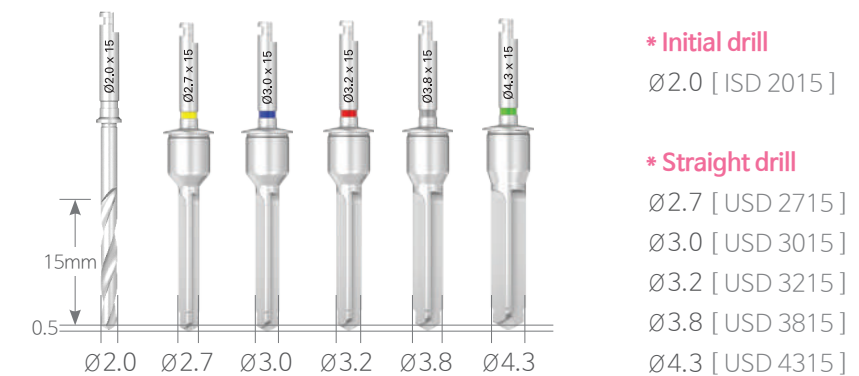

③ Anchor drill & Anchor screw

Surgical guide의 바깥쪽으로 Drilling 후 Anchor screw를 체결하여 고정합니다.

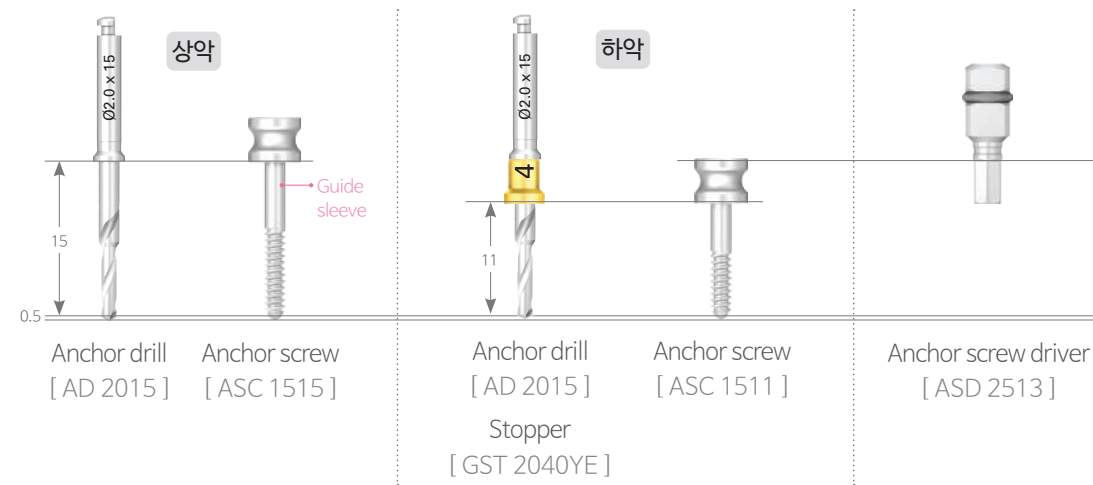


TIP 하악의 경우 반드시 4mm Stopper와 전용 Anchor screw를 사용합니다.

주의 Anchor screw 체결 시

- ① 손으로 체결할 것
- ② 한군데 Hole에 100% 체결 후 다른 Hole에 체결하면 Guide가 뺄어질 수 있으므로 여러 개 Hole에 동시에 체결할 것
- ③ 치은에 밀려 불완전체결이 되지 않도록 밀어 넣으면서 체결할 것

④ Ø2.5 Point straight drill

경사가 심한 Bone에서의 미끄러짐을 방지하고 정확한 위치에 Guide hole을 형성하기 위해 특성화된 Drill입니다.

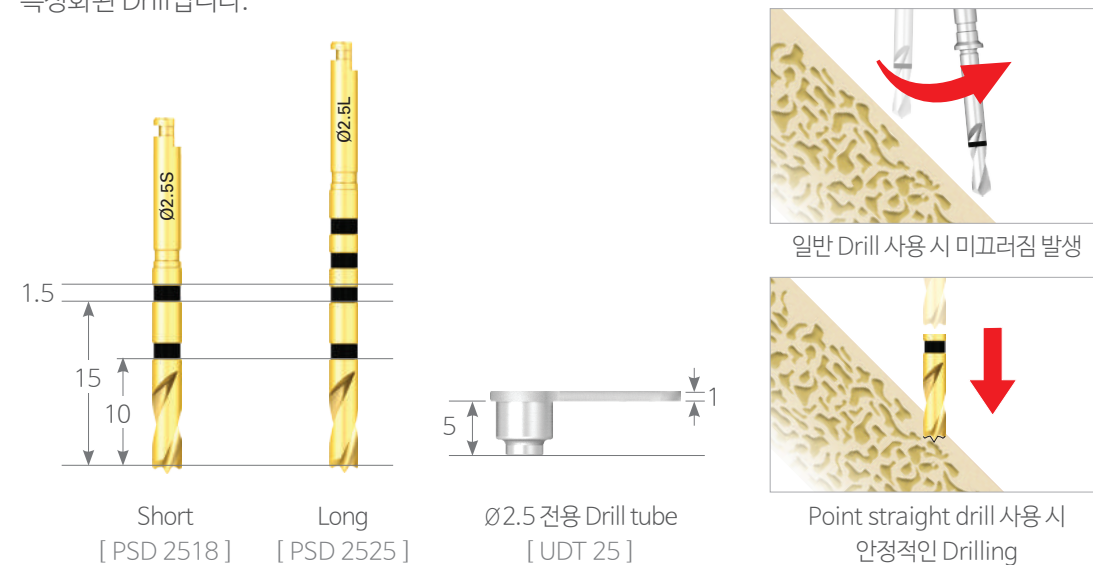


주의 반드시 전용 Drill tube를 체결 후 사용합니다.

TIP 수술 유형별
Surgical tool 사용방법

1 발치즉시 Case

시술 당일 발치하는 경우 + DIOnavi. Master Kit

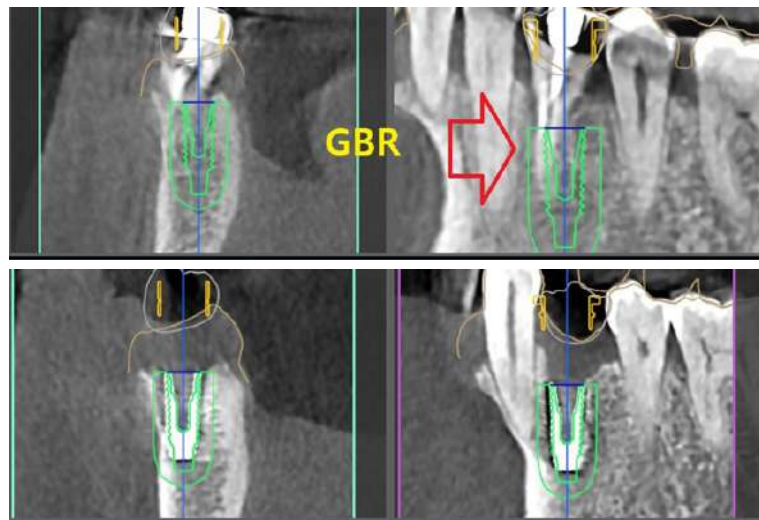

발치 즉시 또는 발치 창 의 치유가 덜 된 부위에서 Drill이 미끄러질 수 있습니다.

▶ Solution ①

Ø2.0 Initial drill (DIOnavi. Master Kit)에 체결하여 원하는 깊이만큼 안정적으로 Drilling 합니다.




Drill tube를 체결한 Ø2.0 Initial drill은 안정적인 고정력으로 정확한 Drilling이 가능하며 짧은 Drill부터 순차적으로 사용하여 발생할 수 있는 오차 범위를 최소화시킬 수 있습니다.



Ø2.7 Drill은 짧은 길이부터 선택하여 Guide sleeve에서의 고정력을 확보할 수 있습니다.


▶ Solution ②

DIOnavi. Special Kit 내 Ø2.5 Point straight drill은 미끄러짐 방지를 위해 설계된 전용 Drill입니다.

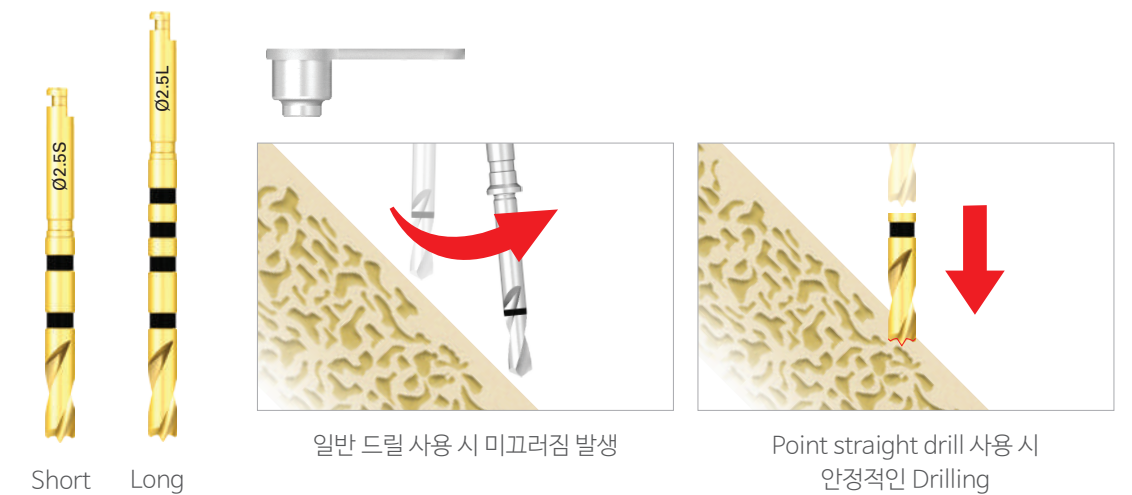

▶ Solution ③ : Profile drill


Profile drill로 발치 후 남은 Bone의 평탄화 작업에 유용합니다.

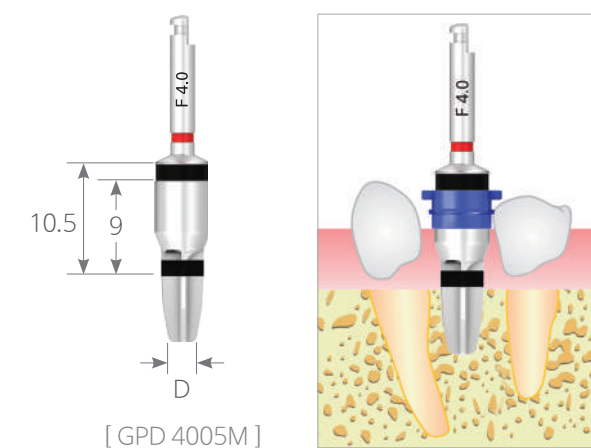

2 개구량이 작은 Case


개구량이 작은 환자에게 구치부 시술 시(주로 제 2대구치) + DIOnavi. Master Kit

▶ 일반적인 Case

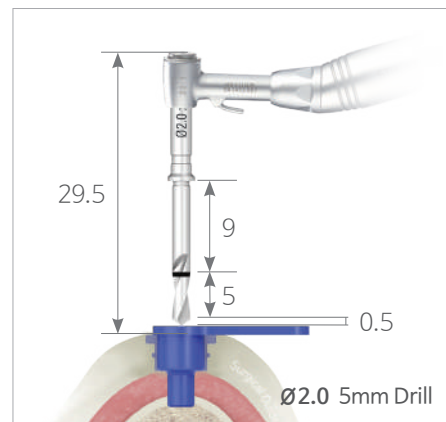

DIOnavi. 시술 시 개구량이 일반 시술보다 약 20mm 이상 높아져 구치부 시술의 경우 Drill 진입이 어려울 수 있습니다.


▶ Solution ①

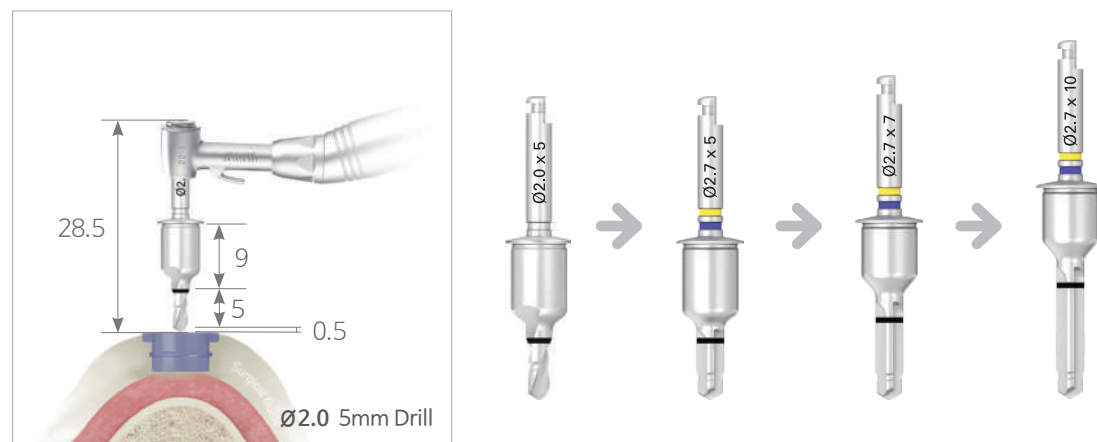

5mm Drill 사용

Drill tube를 사용하지 않고 5·7·10mm로 짧은 Drill부터 순차적으로 늘려줍니다.


▶ Solution ②

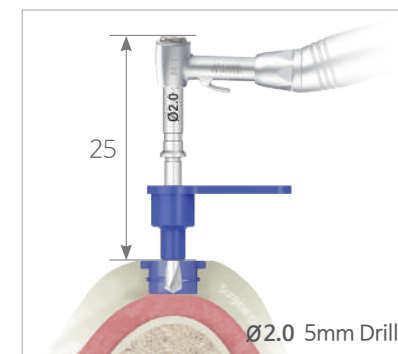

Drill tube와 5mm Drill을 구강밖에서 체결 후 Guide 장착

Drill tube에 Ø2.0 x 5mm Drill을 구강 밖에서 체결 후 Guide에 장착하면 높이 부담을 줄일 수 있습니다.

▶ Solution ③

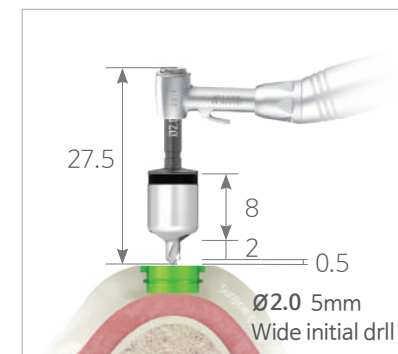

Wide sleeve 및 Wide initial drill 사용 시

Wide sleeve 및 Wide 전용 Kit를 사용합니다.

3 Sinus Case

① DIOnavi. Surgical Kit 준비

Guide를 이용한 Sinus case 시술 시 DIOnavi. Master Kit와 DIOnavi. Flapless Crestal Sinus Kit 두가지가 사전에 준비되어 있어야 합니다.




DIOnavi. Master Kit




DIOnavi. Flapless Crestal Sinus Kit

* 수술 시 확인해야 할 수치

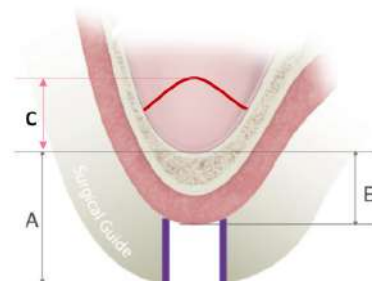

- Ⓐ Surgical guide sleeve 상단에서 상악동저까지의 길이
- Ⓑ 상악동저에서 잇몸까지의 길이
- ※ Bone condenser & Depth gauge 사용 시 눈금으로 깊이를 알 수 있습니다.
- ⓒ 상악동 거상 및 Bone graft 높이

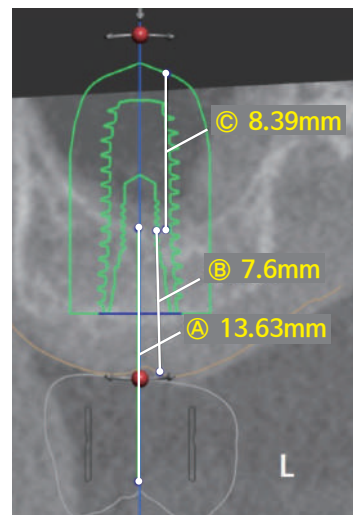

② Sinus case 수술 시 Tool 사용

Surgical guide의 바깥쪽으로 Drilling 후 Anchor screw를 체결하여 고정합니다.

▶ Initial drill & Straight drill


DIOnavi. Master Kit의 Tissue punch와 Bone flattening drill 사용 후 Initial drill과 Straight drill에 Stopper를 체결하여 순차적으로 Drilling 합니다.

* Initial drill - 식립 Hole (Osteotomy site) 형성

- Ø2.0 Initial drill을 사용하여 Drilling hole을 형성합니다.
- Drilling 깊이는 CT상에서 측정된 상악동저 하방 골 높이를 기준으로 상악동저 바로 하방 1~1.5mm까지 Drilling 합니다.

※ Drill tube : 보다 정확한 위치, 방향에 대한 고정력 확보


- 주의**
- ① 깊이 조절은 반드시 Stopper를 사용
 - ② 무주수 저속 Drilling (100 rpm / 55Ncm)
 - ③ DIOnavi. Master Kit Ø2.0 Initial drill 사용

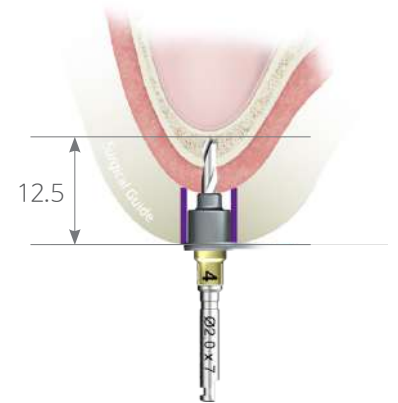

* Straight drill - Drilling hole 확장 및 하연접근

Straight drill을 순차적으로 사용하여 Drilling hole을 확장합니다.

- 주의**
- ① 깊이 조절은 반드시 Stopper를 사용
 - ② 무주수 저속 Drilling (100 rpm / 55Ncm)
 - ③ DIOnavi. Master Kit final drill 사용

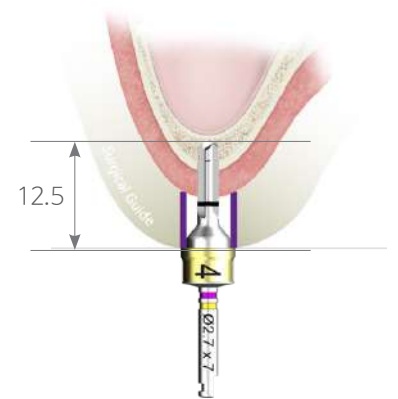


▶ Sinus drill 상악동저 골 천공

앞 단계 Drilling 보다 1mm 더 깊게 Drilling 하면서 힘을 주어 개통합니다.

- 주의** 깊이 조절은 반드시 Stopper를 사용, 무주수로 저속 Drilling (10 rpm)

- Tip** Sinus drill 사용 시 깊이 조절 방법
- ① Stopper에 의한 길이 조절 가능
 - ② Stopper를 고정하고 Drill 길이를 바꿔 사용 가능
 - ③ Sinus drill 종류 : 17mm / 18mm / 19mm / 21mm (Option)

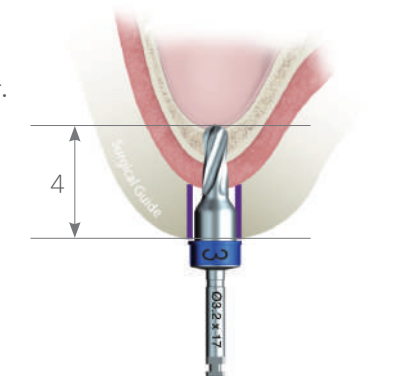

▶ Water membrane lifter – Sinus 막 거상

Guide를 제거하고 Water membrane lifter를 이용하여 Drilling hole 안으로 식염수를 주입합니다.


- 주입량은 막 거상을 위해 약 0.6cc 주입합니다.
- 주입 시 압력이 느껴질 때부터 주입량을 계산합니다.

* 압력이 가해지는 부분

압력이 가해지기 전 약 0.5cc 정도 주입됩니다.

이때 주입된 양은 제외하고 약 0.4cc 주입하여 거상합니다.

※ 압력이 가해지기 전 주입량은 골의 높이 및 확장 양에 따라 다릅니다.

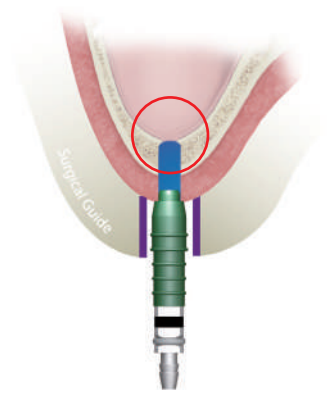

* 상악동 하연(A) 개통

식염수 주입 시 압력이 느껴지며 막이 거상 되면서 압력이 떨어지고 식염수가 주입됩니다.

* 상악동 하연(A) 개통 안 된 경우

식염수 주입 시 압력이 느껴진 후 더 이상 압력을 가할 수 없거나, 노즐이 밀려 나옵니다.


※ Sinus drill을 1mm 더 깊게 Drilling 후 재시도

* 상악동막 거상 확인

노즐을 Hole에 유지한 상태로 식염수 Aspiration 합니다.

주입한 식염수의 양만큼 Aspiration 된 상태가 막이 온전함을 나타냅니다.

※ 혈액이 섞여 나옵니다.

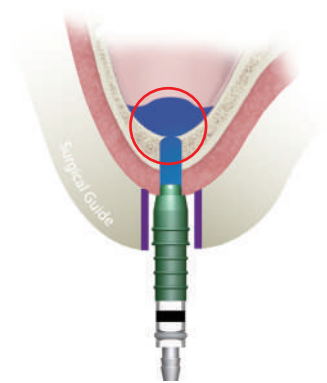


▶ Sinus drill – 상악동 하연 관통

상악동 막을 거상 시킨 후 Sinus drill을 1mm 더 깊게 Drilling 하여 상악동 하연을 완전히 개통합니다.

Bone condenser를 이용하여 상악동 하연 개통 여부 확인이 가능합니다.

- 주의**
- ① 반드시 깊이 조절을 위해 Stopper를 사용
 - ② 무주수 저속 Drilling (10 rpm / 35Ncm)
 - ③ Bone condenser에 Stopper를 체결하고 사용
 - ④ 개통되지 않고 골이식재를 주입할 시 더 이상 골이식재가 들어가지 않는 경우가 발생할 수 있음

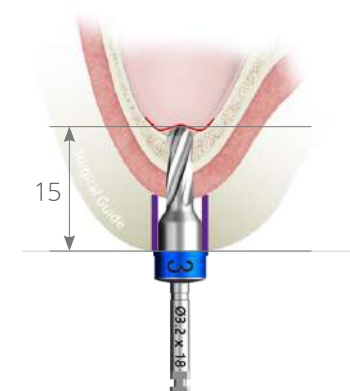

▶ Bone condenser – 골이식재 주입

Surgical guide를 제거하고 Drilling hole을 통해

Bone condenser로 골이식재를 상악동 내부까지 주입합니다.

- DIOnavi. 스펀지형 골이식재 권장
- 골이식재가 상악동 내에서 막을 들어 올려 공간 유지 가능
- 골 이식 후 Implant 즉시 식립의 경우 Implant가 스펀지형 골이식재와 함께 상악동 내 공간을 유지하고 골형성을 촉진

주의 반드시 깊이 조절을 위해 Stopper를 사용해야 합니다.




* 골이식재의 부피 결정

Sinus 막 거상 높이	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	9mm	10mm
Implant 식립할 경우	0.1cc	0.2cc	0.3cc	0.4cc	0.5cc	0.6cc	0.7cc	0.8cc	0.9cc	1.0cc
Implant 식립하지 않을 경우	0.3cc	0.6cc	0.9cc	1.2cc	1.5cc	1.8cc	2.1cc	2.4cc	2.7cc	3.0cc

▶ Depth gauge – 골이식재 분산(선택 사항)

Surgical guide 제거 후 Depth gauge를 상악동 내부에 넣고 회전 시켜 골이식재를 골고루 분산시킵니다.


주의 반드시 깊이 조절을 위해 Stopper를 사용해야 합니다.

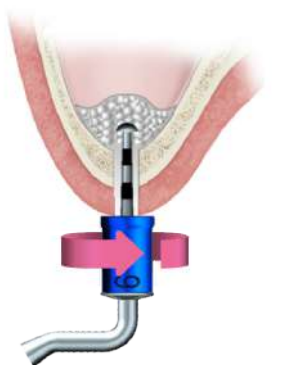

▶ Final drilling

Surgical guide 장착 후 Sinus drill의 깊이보다 2mm 더 깊게 Drilling 합니다.

- 주의**
- ① 깊이 조절은 반드시 Stopper를 사용
 - ② 무주수 저속 Drilling (100 rpm / 55Ncm)
 - ③ 골질이 약할 경우 한두 단계 아래 Drill까지 사용 권장

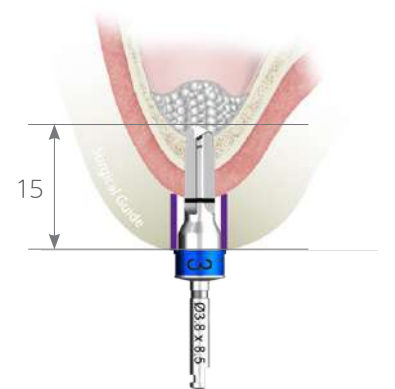


▶ Abutment profile drill

Abutment 또는 H-Scan body 체결 시 간섭이 되는 치조골을 제거합니다.

Drill을 Sleeve의 내면을 타고 회전시켜 Abutment profile을 형성합니다.

※ Cortical 층이 두꺼우면 주수하면서 RPM을 높여서 사용합니다. (800 rpm)

※ Sinus 개통 후 잔존골이 1~2mm일 경우 사용을 제한합니다.

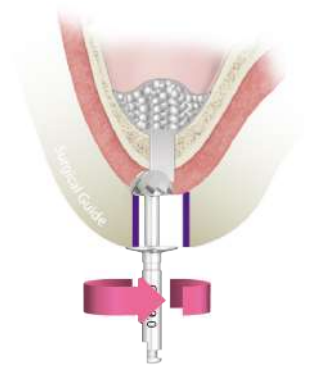

▶ Implant connector - Fixture 식립

Surgical guide를 이용하여 Implant를 식립하며 상악동 내에 진입한 Implant가 골이식재를 밀어내면서 분산시킵니다.

Tip 잔존골량에 따른 Fixture 식립

- 4mm 이상인 경우 양호한 초기 고정력을 얻을 수 있으며 Implant 즉시 식립과 임시보철을 수복 가능
- 3mm 이하로 얇으면서 Implant 초기 고정이 잡히지 않을 경우 Implant를 동시에 식립하지 않고 상악동 골이식만 시행

주의 Implant 식립 시 무주수 저속(30 rpm / 35Ncm)



4 Edentulous Case

무치악에서 고정하는 방법에 대한 Process


DIONavi. Special Kit



DIONavi. Special Kit



Pin

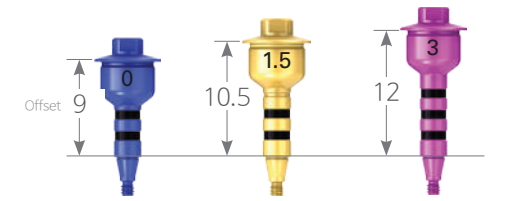


[SGF 6309] [SGF 6310] [SGF 6312]

※ Fix는 Sleeve offset에 따라 9mm · 10.5mm · 12mm가 있습니다.

▶ 무치악 고정 Guide fix & Fix pin

별도로 Hole을 형성할 필요 없이, Implant를 식립할 위치에서 고정을 얻을 수 있습니다.

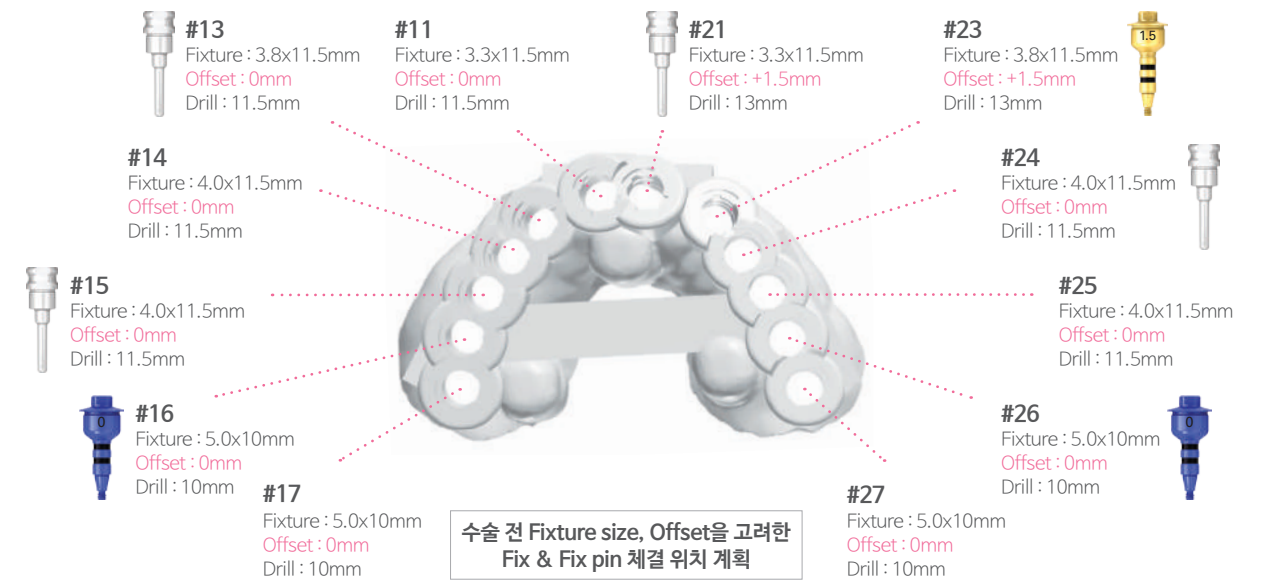


* 무치악 고정하는 방법 예시



주의 Fix pin을 고정하는 부위는 뼈의 두께가 양호한 곳을 추천합니다.

▶ Anchor drill & Anchor screw

Guide의 옆면에서 고정합니다.

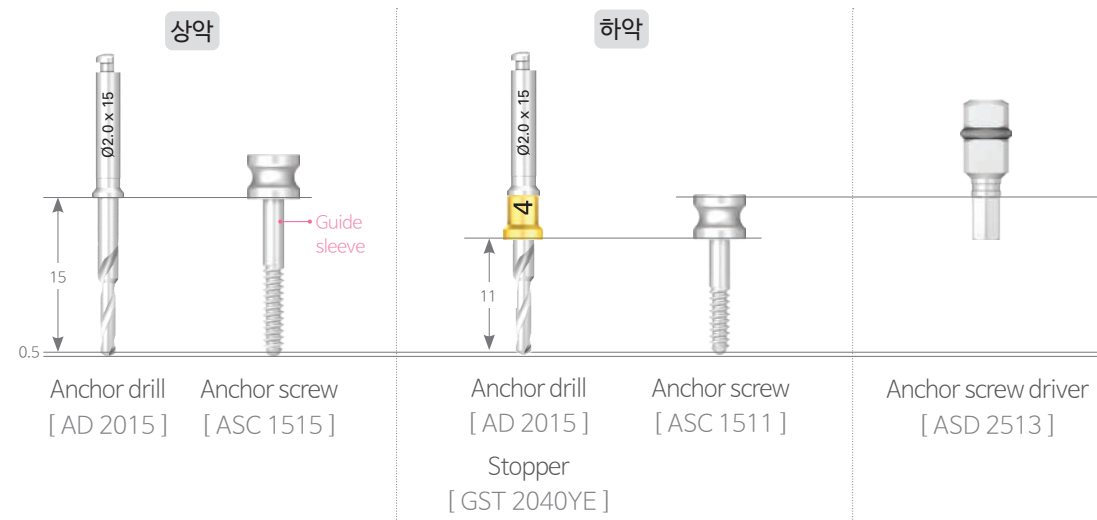


TIP 하악의 경우 반드시 4mm Stopper와 전용 Anchor screw를 사용합니다.


주의 Anchor screw 체결 시

- ① 손으로 체결할 것
- ② 한군데 Hole에 100% 체결 후 다른 Hole에 체결하면 Guide가 뺄어질 수 있으므로 여러 개 Hole에 동시에 체결할 것
- ③ 치은에 밀려 불완전체결이 되지 않도록 밀어 넣으면서 체결할 것

* Anchor process

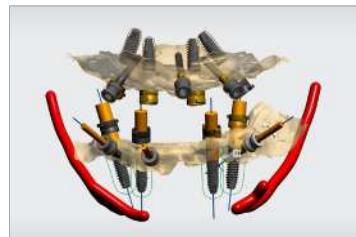


① Anchor planning

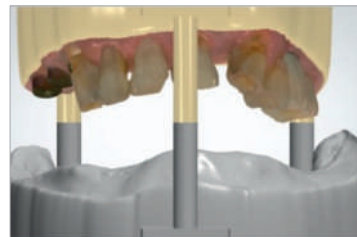

② 교합기 Design



③ 교합기 제작

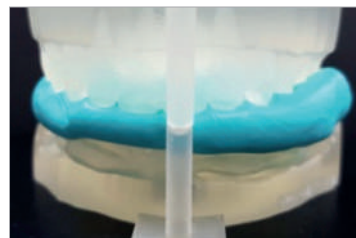

④ 교합기를 이용한 고정 Bite 제작



⑤ 고정 Bite를 이용하여 구강 내 Guide 장착

※ 스캔파일 또는 석고모델에서 Bite 채득이 오류가 있을 경우 제작이 불가, 구강에서 고정 Bite 제작을 권장

DIO DIGITAL ACADEMY

DDA

원장님의 경쟁력을 높일 수 있는
기회가 열립니다!

핸즈온 중심 통합 교육 프로그램 디오 디지털 아카데미

DIONavi.만이 가능한 Flapless sinus & Edentulous solutions!

디오나비 활용 테크닉과 Learning curve 극복 노하우를 체계적으로 만나볼 수 있는 디오 디지털 아카데미

등록방법 | 디오나비 홈페이지 www.dionavi.co.kr 온라인 접수

문의처 | 디오 전 지점



DDA 커리큘럼 안내

코스	시간	강의 내용	특기 사항
DDA Basic Course	15:00 - 15:30	DIONavi. 이론 및 시스템의 이해	▶ 교육시간 : 4시간 ▶ 실습비 : 무료 ▶ 토 (15시-19시)
	15:30 - 16:00	Hands-on : Bone block	
	16:00 - 17:00	Hands-on : Case 2 (구치부 Bridge)	
	17:00 - 18:00	Hands-on : Case 3 (전치부 Bridge)	
	18:00 - 19:00	Hands-on : Case 6 (Sinus double)	
DDA Advanced Course	15:00 - 16:00	DIONavi. Key point	▶ 교육시간 : 4시간 ▶ 실습비 : 별도문의 ▶ 토 (15시-19시) ▶ DIONavi. 계약 시 무상교육
	16:00 - 17:00	DIONavi. 시술 다양한 임상케이스 소개	
	17:00 - 18:00	DIONavi. 시술시 난케이스 극복 경험담	
	18:00 - 19:00	Hands-on : Case 4(무치악)	

※ 상기 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

